

# POTENZA BLOCCO

INSTRUÇÕES DE USO AO PROFISSIONAL

## PHS DO BRASIL LTDA

Rua Ottokar Doerffel, 1112, Bairro: Atiradores, Cidade: Joinville, Estado: SC,

País: Brasil CEP: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05 INDÚSTRIA BRASILEIRA

E-MAIL: vendas@phsdo brasil.com.br

Autorização de Funcionamento MS: X401M5619X7L(8.11992.7)

Registro na ANVISA nº 8.11992.70009

Responsável Técnico: ÉLEN ALVES LOOS - CRQ/SC N. 13303733



**Nome comercial do produto:** POTENZA BLOCCO.

**Nome técnico do produto:** BARREIRA GENGIVAL  
FOTOPOLIMERIZÁVEL.

**LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA  
INSTRUÇÃO DE USO ANTES DE APLICAR O PRODUTO.**

**GUARDE ESTA INSTRUÇÃO ATÉ NÃO HAVER MAIS  
INTERAÇÃO DO PRODUTO COM O SEU PACIENTE.**

## **COMPOSIÇÃO BÁSICA:**

Grupos dimetacrilatos, BHT, catalisadores, pigmentos e corantes.

## **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**O POTENZA BLOCCO** é uma resina fotopolimerizável utilizada para proteger os tecidos moles adjacentes ao dente, atuando como uma barreira física que inibe o contato de substâncias com o tecido mole, protegendo-o. Previamente à cura, o produto tem aspecto de pasta fluida com comportamento estático. Após a cura, torna-se insolúvel e rígida, porém com elevada resiliência. O produto pode ser apresentado na cor azul ou verde.

## **INDICAÇÃO DO PRODUTO:**

É indicado como barreira gengival durante o clareamento em consultório. Ainda, pode ser utilizado como estabilizador da matriz em restaurações e auxiliar no isolamento absoluto estabilizando grampos e vedando margens.

## **PRECAUÇÕES:**

- Evite aplicar o produto na gengiva se o tecido tiver passado recentemente por procedimento cirúrgico, apresentar sinais de inflamação ou irritação;
- Seque a gengiva antes da aplicação do produto. Qualquer umidade presente na superfície pode coibir a devida aderência do material;
- Antes de prosseguir em uma consulta de clareamento, certifique-se de que o produto foi completamente curado e encontra-se firmemente aderido ao tecido gengival;
- Antes da fotopolimerização, o produto tem potencial irritante e pode causar leve irritação gengival. Atente para respostas exacerbadas e nesse caso considere a possibilidade de um processo alérgico.

## **EFEITOS COLATERAIS:**

O produto possui em sua composição monômeros de metacrilato que podem causar reações alérgicas ou irritações leves a pacientes sensíveis a estas substâncias;

Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas;

Caso o paciente apresente alergia, encaminhá-lo a atendimento médico em posse deste documento.

## **ADVERTÊNCIAS:**

- Respeite o prazo de validade. Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado;
- Mantenha fora do alcance das crianças;
- Somente para uso odontológico;
- Antes de utilizar observe o aspecto do produto, caso perceba alguma anomalia entre em contato imediatamente com o fabricante;
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso inadequado ou por manipulação incorreta;
- Este produto foi fabricado somente para uso odontológico e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso;
- É de responsabilidade do profissional comprovar antes da utilização do produto, se este produto é compatível e adequado para a utilização desejada;
- Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins;
- Para realizar o descarte do produto siga a legislação local.

## **INSTRUÇÕES DE USO:**

**1º Passo:** Seque a gengiva e os dentes correspondentes a região na qual o produto será aplicado;

**2º Passo:** Aplique o produto diretamente da seringa utilizando a ponteira aplicadora. Cubra toda a margem gengival com atenção especial às áreas interpapilares. A barreira deve apresentar cerca de 1mm de altura e 1mm de espessura, cobrindo ligeiramente a margem cervical de esmalte de cada dente. Sugere-se dividir a aplicação em segmentos de 3 em 3 dentes;

**3º Passo:** Para uma área correspondente a 3 dentes, fotopolimerize o produto por 30 segundos em movimento de varredura, mantendo a ponteira do fotopolimerizador\* o mais próximo possível do produto;

**\*O fotopolimerizador deve possuir potência mínima de 800mw/cm<sup>2</sup> e comprimento de onda de 400nm.**

**4º Passo:** Verifique se o produto cobre toda a superfície do tecido mole, principalmente área interdental. Áreas descobertas devem ser reparadas. Certifique-se também de que o material está devidamente curado (rígido) e aderido ao tecido;

**5º Passo:** Repita a aplicação (passos 2 a 4) na margem gengival dos demais dentes a serem clareados;

**6º Passo:** Proceda ao clareamento conforme instruções específicas do clareador. Ao concluir a sessão, remova a barreira gengival com auxílio de uma sonda exploradora, deslocando-a gentilmente até que se desprenda em grandes pedaços ou por inteiro.

### **CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:**

- Manter o produto na embalagem original;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazene o produto em temperaturas de 0°C a 30°C.

### **CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:**

- O produto pode ser transportado a temperaturas entre -5°C e 50°C;
- Proteger da incidência da luz solar direta.

**DATA DE FABRICAÇÃO:** VIDE EMBALAGEM

**PRAZO DE VALIDADE:** 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.

**PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. SOMENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA.**


**MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.**



**SIGA AS INSTRUÇÕES DE USO CORRETAMENTE**



**DESTINE APENAS À UTILIZAÇÃO MEDIANTE PRESCRIÇÃO**

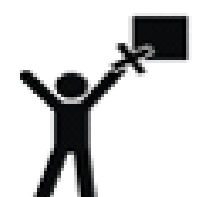

**MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS**



**EMBALAGEM RECICLÁVEL**



**VIDE MANUAL DE INSTRUÇÃO**



**IRRITANTE**

# POTENZA BLOCCO

**INSTRUCTIONS FOR USE FOR PROFESSIONALS**

## **PHS DO BRASIL LTDA**

Street Ottokar Doerffel, 1112, District: Atiradores, City: Joinville,

State: Santa Catarina, Country: Brasil Zip Code: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05

BRAZILIAN INDUSTRY

E-MAIL: contato@phsdobrasil.com.br

Health Ministry's Operating Licence: X401M5619X7L(8.11992.7)

Registry at ANVISA number 8.11992.70009

Technical Manager: ÉLEN ALVES LOOS - CRQ/SC N. 13303733



**Technical Support**

**0800-000-3780**

[www.phsdobrasil.com.br](http://www.phsdobrasil.com.br)

**Product's name:** POTENZA BLOCCO

**Product's Technical name:** Light-curing gingival barrier

**READ ALL INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.**

**KEEP THIS DOCUMENT UNTIL THERE IS NO MORE INTERACTION OF THE PRODUCT WITH YOUR PATIENT.**

### **BASIC COMPOSITION:**

Dimethacrylate groups, BHT, catalizers, pigments and dyes.

### **PRODUCT'S DESCRIPTION:**

**POTENZA BLOCCO** is a light-curing resin indicated to protect gingival margins during in office bleaching, once hydrogen peroxide may injury soft tissues in a situation of direct contact. POTENZA BLOCCO is also indicated to improve sealing of total dam, mainly for cases of complex restorations/cementations and endodontic treatments.

**PRODUCT'S INDICATION:**

Indicated to protect gingival tissue from direct contact to harmful substances (i.e. hydrogen peroxide) and also to improve sealing of total dam isolation.

**PRECAUTIONS:**

Avoid application on gingival tissue that has recently undergone surgical procedure or presenting unhealthy aspect. In some cases, incomplete light-curing of the product may cause mild irritation.

**SIDE EFFECTS:**

The product has methacrylate monomers in its composition that may cause allergic reactions or mild irritation to patient sensitive to these substances. Discontinue use in case of allergic reactions. If the patient present allergy, professional must take him/her to a medic along with the product's instructions for use.

**WARNINGS:**

Respect the expiry date of the product and do not use it after its expiry date. Maintain the product out of children's reach. Only for professional use. Before using, observe the aspect of the product, if any anomaly is noticed, contact the manufacturer immediately. Manufacturer does not take responsibility for damage caused by inadequate use or incorrect manipulation. This product is intended for dental use only and should be used strictly according to this instructions document. It is of full responsibility of the professional to make sure, before using the product, if it is compatible to the desired use. Do not reuse the empty package. For proper product disposal, follow local legislation.

**INSTRUCTIONS FOR USE:**

**1ST STEP:** Dry gingiva and teeth on the region to receive the product.

**2nd STEP:** Apply the product with the aid of the application tip. Make sure that the layer has about 1mm of thickness.

**3rd STEP:** For groups of 3 to 4 teeth, light-cure the resin for 20 to 30 seconds.

**4TH STEP:** Make sure there is no gap and that the resin is completely cured.

**5th STEP:** to remove the product, dettach it gently with an explorer until it comes off in big pieces or single piece.

**CONSERVATION AND STORAGE:**

Maintain the product in its original package. Protect it from direct sunlight. Keep it in temperatures of 0°C a 30°C (32o F to 86o F).

**TRANSPORTATION CONDITIONS:**

Product must be transported in temperatures between -5°C e 50°C (23o F to 122o F). Protect it from direct sunlight.

**DATE OF MANUFACTURE:**

See package

**EXPIRY DATE:**

2 YEARS AFTER DATE OF MANUFACTURE

**SALES UNDER PRESCRIPTION (ACCORDING TO RDC N° 6 OF 2015).**

**PRODUCT FOR EXCLUSIVE USE IN DENTAL OFFICE AND ONLY BY DENTAL PROFESSIONALS.**

**WHEN NOT IN USE, KEEP THE PRODUCT'S PACKAGE CLOSED.**



**FOLLOW THE INSTRUCTIONS  
FOR USE CORRECTLY**



**INTENDED FOR  
PRESCRIPTION USE  
ONLY**



**KEEP OUT OF  
REACH OF  
CHILDREN**



**RECYCLABLE  
PACKAGING**



**SEE INSTRUCTION  
MANUAL**

# POTENZA BLOCCO

## Instrucciones de uso al profesional

### PHS DO BRASIL LTDA

Calle Ottokar Doerffel, 1112, Barrio:  
Atiradores, Ciudad: Joinville, Estado: SC, País:  
Brasil CEP: 89203-212  
CNPJ: 17.910.389/0001-05  
INDUSTRIA BRASILEÑA  
E-MAIL: contato@phsdobrasil.com.br  
Autorización de Operación MS: X401M5619X7L(8.11992.7)  
Registro en ANVISA nº 81199270009  
Gerente Técnico: ÉLEN ALVES LOOS - CRQ/SC N. 13303733

**Nombre comercial del producto:** POTENZA BLOCCO.

**Nombre técnico del producto:** BARRERA GINGIVAL  
FOTOPOLIMERIZABLE.

**POR FAVOR, LEA TODA LA INFORMACIÓN EN ESTA  
INSTRUCCIÓN ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.**

**GUARDE ESTA INSTRUCCIÓN HASTA QUE NO HAYA MÁS  
INTERACCIÓN DEL PRODUCTO CON SU PACIENTE.**

### **COMPOSICIÓN BÁSICA:**

Grupos dimetacrilatos, BHT, catalizadores, pigmentos y colorantes.

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

**POTENZA BLOCCO** es una resina fotopolimerizable utilizada para proteger el tejido blando adyacente al diente, actuando como una barrera física que inhibe el contacto de sustancias con el tejido blando, protegiéndolo. Antes del curado, el producto tiene un aspecto de pasta fluida con comportamiento estático. Después de la curación, se vuelve insoluble y rígido, pero con alta resiliencia. El producto se puede presentar en azul o verde.



## **INDICACIÓN DEL PRODUCTO:**

Está indicado como barrera gingival durante el blanqueamiento en el consultorio. También se puede utilizar como estabilizador de matriz en restauraciones y ayudar en el aislamiento absoluto mediante la estabilización de abrazaderas y sellado de márgenes.

## **PRECAUCIONES:**

- Evite aplicar el producto a las encías si el tejido ha pasado recientemente por un procedimiento quirúrgico, muestra signos de inflamación o irritación;
- Seque las encías antes de aplicar el producto. Cualquier humedad presente en la superficie puede frenar la debida adhesión del material;
- Antes de proceder en una consulta de blanqueamiento, asegúrese de que el producto se haya curado por completo y esté firmemente adherido al tejido gingival;
- Antes de la fotopolimerización, el producto tiene potencial irritante y puede causar irritación gingival leve. Tenga cuidado con las respuestas exacerbadas y en este caso considere la posibilidad de un proceso alérgico.

## **EFFECTOS SECUNDARIOS:**

- El producto tiene en su composición monómeros de metacrilato que pueden causar reacciones alérgicas o irritaciones leves a pacientes sensibles a estas sustancias;
- Suspender el uso del producto en caso de reacciones alérgicas;
- Si el paciente tiene una alergia, remítalo a atención médica en posesión de este documento.

## **ADVERTENCIAS:**

- Respetar la fecha de caducidad. Nunca use el producto si ha caducado;
- Manténgalo fuera del alcance de los niños;
- Exclusivo para uso odontológico;
- Antes de su uso, tenga en cuenta la apariencia del producto, si nota alguna anomalía, comuníquese con el fabricante de inmediato;
- El fabricante no es responsable de los daños causados por el uso inadecuado o un manejo inadecuado;

- Este producto se fabrica solo para uso odontológico y debe manipularse de acuerdo con las instrucciones de uso.
- Es responsabilidad del profesional comprobar el pedido antes del uso del producto si este producto es compatible y adaptado para el uso deseado;
- No reutilizar el embalaje vacío para otros fines;
- Para deshacerse del producto, siga la legislación local.

### **INSTRUÇÕES DE USO:**

**1º Paso:** Secar encías y dientes correspondientes a la región en la que se aplicará el producto;

**2º Paso:** Aplique el producto directamente de la jeringa con el aplicador de punta. Cubrir todo el margen gingival con especial atención a las zonas interpilares. La barrera debe ser de aproximadamente 1 mm de alto y 1 mm de grosor, cubriendo ligeramente el margen de esmalte cervical de cada diente. Se sugiere dividir la aplicación en segmentos de 3 en 3 dientes;

**3º Paso:** Para un área correspondiente a 3 dientes, fotopolimerice el producto durante 30 segundos en movimiento de barrido, manteniendo la punta del fotopolimerizador\* lo más cerca posible del producto;

\*El fotopolimerizador debe tener una potencia mínima de 800mw/cm<sup>2</sup> y una longitud de onda de 400nm.

**4º Paso:** Compruebe que el producto cubre toda la superficie del tejido blando, especialmente el área interdental. Las áreas descubiertas deben ser recuperadas. También asegúrese de que el material esté correctamente curado (rígido) y adherido al tejido;

**5º Paso:** Repetir la aplicación (pasos 2 a 4) en el margen gingival de los otros dientes a blanquear;

**6º Paso:** Blanquear de acuerdo con las instrucciones específicas del blanqueador. Cuando se complete la sesión, retire la barrera gingival con la ayuda de una sonda explotadora, desplazándola suavemente hasta que se desprenda en trozos grandes o enteros.

### **CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:**

- Mantener el producto en su embalaje original;
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa;
- Conservar el producto a temperaturas de 0°C a 30°C.

**CONDICIONES DE TRANSPORTE:**

- El producto puede ser transportado a temperaturas entre -5°C y 50°C;
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa.


**FECHA DE FABRICACIÓN:** VER EMBALAJE

**VIDA ÚTIL:** 2 AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

**VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN - (SEGÚN RDC No. 6 DE 2015).**

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. SOLO PARA USO DE PROFESIONALES DENTALES.**

**MANTENGA EL EMBALAJE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.**

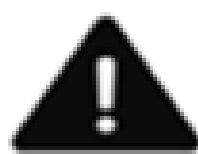


SIGA LAS  
INSTRUCCIONES DE  
USO CORRECTAS




DESTINE SOLO PARA  
USO CON RECETA



MANTENER FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS  
NIÑOS

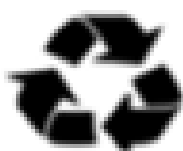

ENVASES  
RECICLABLES

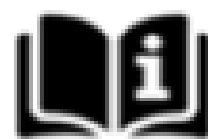

VER MANUAL DE  
INSTRUCCIONES