

Potenza ESENTE

INSTRUÇÕES DE USO AO PROFISSIONAL



PHS DO BRASIL LTDA

Rua Guilherme Boldt 210, Bairro: Zona Industrial Norte, Cidade: Joinville,

Estado: Santa Catarina, País: Brasil - CEP: 89239-260

CNPJ: 17.910.389/0001-05 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Autorização de Funcionamento MS: 8.11992.7 (X401M5619X7L)

Notificação na ANVISA nº 8.11992.79018

EU

REP

CINTERQUAL – Soluções de Comércio

Internacional Lda; Avenida Defensores de Chaves, Nº 4

Escritório Idea Spaces – 1000-117

Lisboa – Portugal +351 967 417 654

Nome Comercial do Produto: POTENZA ESENTE 2%.

Nome Comercial Alternativo: AGENTE DESSENSIBILIZANTE.

Nome Técnico do Produto: SUBSTÂNCIA PARA TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTÁRIA.

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO ANTES DE APLICAR O PRODUTO.

GUARDE ESTA INSTRUÇÃO ATÉ NÃO HAVER MAIS INTERAÇÃO DO PRODUTO COM O SEU PACIENTE.



Suporte Técnico

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br



COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Nitrato de potássio a 6%, fluoreto de sódio 2%, umectante (glicerol), neutralizantes, espessantes e água deionizada.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA ESENTE 2% é um gel dessensibilizante à base de nitrato de potássio a 6% e fluoreto de sódio a 2%, para uso tópico em consultório. Atua por duplo mecanismo de ação: o nitrato de potássio promove ação neural, aumentando a concentração de potássio extracelular e despolarizando as membranas das fibras nervosas, bloqueando a transmissão do estímulo doloroso; o fluoreto de sódio atua pela oclusão dos túbulos dentinários, reduzindo a permeabilidade da dentina e contribuindo para o alívio da hipersensibilidade.

INDICAÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA ESENTE 2% é indicado no tratamento de dentes com hipersensibilidade baixa a moderada. Foi desenvolvido para atenuar a hipersensibilidade dental desencadeada por agentes térmicos e químicos, principalmente durante o clareamento dental.

PRECAUÇÕES:

- Mantenha sempre afastado do calor e/ou luz solar;
- Não utilizar se for alérgico aos componentes do produto;
- Não ingerir o produto;
- Em caso de reação alérgica, contactar um médico, e o fabricante na posse desta instrução de utilização.
- Produto não injetável;
- Não reutilize a embalagem;

CONTRAINDICAÇÕES:

- POTENZA ESENTE 2% é contraindicado para pessoas com alergia a algum dos componentes da fórmula.

EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS:

- A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas.

ADVERTÊNCIAS:

- Somente para uso odontológico e indicado pelo dentista;
- O produto deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso;
- É de responsabilidade do profissional comprovar, antes da utilização do produto, se o mesmo é compatível e adequado para a utilização desejada;
- Manter fora do alcance de crianças;

- Antes de utilizar, observe o aspecto do produto, caso perceba alguma anomalia entre em contacto imediatamente com o fabricante;
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso inadequado ou por manipulação incorreta;
- Em caso de incidentes graves relacionado com o uso do produto, este deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente;
- Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins;
- Não reutilizar o produto. A reutilização pode causar contaminação microbiana cruzada, perda de eficácia e deterioração da formulação, representando risco à segurança do paciente;
- Para realizar a eliminação segura do dessensibilizante após utilização, siga a legislação local.

INSTRUÇÕES DE USO:

PROTOCOLO PARA TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIZADE DENTAL:

Sugere-se realizar 4 sessões com intervalo de 48h entre elas:

1ª Sessão: Realizar 2 aplicações do produto: a primeira utilizando um fio afastador gengival e a segunda não;

1.1 Aplique o afastador labial. Faça profilaxia com pedra-pomes e água na superfície dental eliminando qualquer depósito que possa impedir o contato do produto nos dentes.

1.2 Insira o fio afastador gengival (sem hemostático) no interior do sulco gengival dos dentes a receberem o dessensibilizante;

1.3 Aplique com auxílio de um microaplicador descartável, o gel dessensibilizante POTENZA ESENTE 2% uniformemente sobre os dentes e aguarde no mínimo 5 minutos, friccionando a cada 2 minutos a superfície dos dentes;

1.4 Remova o gel e o fio afastador. Aplique novamente o dessensibilizante sobre os dentes. Aguarde no mínimo 5 minutos, friccionando a cada 2 minutos a superfície dos dentes. Concluído este passo, o gel dessensibilizante manteve contacto de no mínimo 10 minutos com os dentes.

2ª Sessão: Esta sessão deve ser agendada 2 dias após a anterior. Repita os mesmos passos da 1ª sessão.

3ª Sessão: Aplicação da solução dessensibilizante POTENZA ESENTE GLU- HEMA:

3.1 : Aplique o afastador labial. Faça profilaxia com pedra-pomes e água na superfície dental eliminando qualquer depósito que possa impedir o contacto do produto nos dentes.

3.2 Aplique POTENZA ESENTE GLU-HEMA apenas na área de dentina exposta e deixe o produto agir por 45 seg. Atente para não friccionar o produto na gengiva e não ultrapassar o tempo determinado, pois isso pode causar irritação aos tecidos moles. Após aplicação, remova o excesso de produto com bolinha de algodão. Se necessário, lave a região e seque.

4ª Sessão: Esta sessão deve ser agendada 2 dias após a anterior. Repita os mesmos passos da 3ª sessão.

PROTOCOLO DE DESSENSIBILIZAÇÃO PRÉ-CLAREAMENTO:

1º Passo: Aplique o afastador labial. Faça profilaxia com pedra-pomes e água na superfície dental eliminando qualquer depósito que possa impedir o contacto do produto nos dentes;

2º Passo: Aplique o gel dessensibilizante POTENZA ESENTE 2% uniformemente sobre os dentes, com auxílio da ponteira aplicadora ou microaplicador descartável;

3º Passo: Deixe o produto agir por 5 minutos, realizando movimentos de fricção com o auxílio do microaplicador descartável. Então, lave e aspire o conteúdo. Cuidado para que o paciente não ingira o gel;

4º Passo: De modo complementar, para potencializar o efeito dessensibilizante e maximizar o conforto para o paciente, sugere-se associar o uso do produto POTENZA ESENTE GLU-HEMA. Aplique-o apenas na área de dentina exposta e deixe o produto agir por 45 segundos. Atente para não friccionar o produto na gengiva e não ultrapassar o tempo determinado, pois isso pode causar irritação aos tecidos moles. Após aplicação, remova o excesso de produto com bolinha de algodão, lave e seque a região;

5º Passo: Iniciar o clareamento após o protocolo apresentado, seguindo os passos recomendados pelo fabricante do agente clareador.

6ºPasso: Ao término da sessão de clareamento, caso o paciente apresente sensibilidade residual ou como medida preventiva, repita os passos de 1 a 4. A aplicação pós-clareamento contribui para o alívio imediato do desconforto e potencializa o efeito dessensibilizante.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

- Manter o produto na embalagem original;
- Proteger da incidência da luz solar direta;

- Armazenar o produto a temperaturas entre 0 °C a 30 °C.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

- O produto pode ser transportado a temperaturas entre -5 °C a 50 °C;
- Proteger da incidência da luz solar direta.

DATA DE FABRICAÇÃO: VIDE EMBALAGEM.

PRAZO DE VALIDADE: 3 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.

PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. SOMENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM O PRODUTO A SER UTILIZADO.

PARA TER ACESSO À VERSÃO IMPRESSA DA INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, ENTRE EM CONTACTO COM O SUPORTE TÉCNICO DA EMPRESA.

MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

Data Publicada: 25/06/2026

Código: IFU-004

Versão: 10



Potenza

ESENTE

INSTRUCTIONS FOR USE FOR PROFESSIONALS



PHS DO BRASIL LTDA

Guilherme Boldt Street, 210, District: Zona Industrial Norte, City: Joinville,

State: Santa Catarina, Country: Brazil - Zip Code: 89239-260

CNPJ: 17.910.389/0001-05 - BRAZILIAN INDUSTRY

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Health Ministry's Operating Licence: 8.11992.7 (X401M5619X7L)

Notification at ANVISA number: 8.11992.79018



CINTERQUAL – Commerce Solutions

International Lda; Avenida Defensores de Chaves, Nº 4

Idea Spaces Office – 1000-117

Lisboa – Portugal +351 967 417 654

Product Commercial Name: POTENZA ESENTE 2%.

Alternative Commercial Name: DESENSITIZING AGENT.

Technical Product Name: SUBSTANCE FOR THE TREATMENT OF DENTAL HYPERSENSITIVITY.

READ ALL THE INFORMATION IN THIS INSTRUCTION TO USE CAREFULLY BEFORE APPLYING THE PRODUCT.

KEEP THIS INSTRUCTION UNTIL THERE IS NO FURTHER INTERACTION OF THE PRODUCT WITH YOUR PATIENT.



Technical Support

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br



BASIC COMPOSITION:

Potassium Nitrate at 6%, Sodium Fluoride at 2%, humectant (glycerol), neutralizers, thickeners and deionized water.

PRODUCT DESCRIPTION:

POTENZA ESENTE 2% is a desensitizing gel based on 6% potassium nitrate and 2% sodium fluoride, for topical use in the dental office. It acts through a dual mechanism of action: potassium nitrate promotes neural action by increasing extracellular potassium concentration and depolarizing nerve fiber membranes, blocking the transmission of painful stimuli; sodium fluoride acts by occluding dentinal tubules, reducing dentin permeability and contributing to hypersensitivity relief.

PRODUCT INDICATION:

POTENZA ESENTE 2% is indicated for the treatment of teeth with low to moderate hypersensitivity. It was developed to attenuate dental hypersensitivity triggered by thermal and chemical agents, particularly during tooth whitening.

PRECAUTIONS:

- Keep away from heat and/or sunlight at all times;
- Do not use if allergic to any of the product's components;
- Do not ingest the product;
- In case of allergic reaction, contact a physician and the manufacturer with this instruction for use at hand;
- Non-injectable product;
- Do not reuse the packaging.

CONTRAINDICATIONS:

- POTENZA ESENTE 2% is contraindicated in individuals with hypersensitivity to any component of the formulation.

POSSIBLE SIDE EFFECTS:

- Ingesting large amounts of the product can cause nausea.

WARNING:

- For dental use only, as indicated by the dentist;
- The product must be handled in accordance with the instructions for use;
- It is the professional's responsibility to verify, prior to use, whether the product is compatible and suitable for the intended application;
- Keep out of reach of children;
- Before use, inspect the product's appearance; if any anomaly is observed, contact the manufacturer

immediately;

- The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or incorrect handling;
- In the event of serious incidents related to the use of this product, these must be reported to the manufacturer and to the competent authority;
- Do not reuse empty packaging for other purposes;
- Do not reuse the product. Reuse may cause cross-microbial contamination, loss of efficacy and deterioration of the formulation, posing a risk to patient safety;
- For safe disposal of the desensitizer after use, follow local regulations.

INSTRUCTIONS FOR USE:

PROTOCOL FOR DENTAL HYPERSENSITIVITY TREATMENT:

It is recommended to perform 4 sessions with a 48-hour interval between them:

1st Session: Perform 2 applications of the product: the first using a gingival retraction cord and the second without it.

1.1 Apply the lip retractor. Polish the dental surface with pumice stone and water to remove any deposits that may prevent contact of the product with the teeth.

1.2 Insert the gingival retraction cord (without hemostatic agent) into the gingival sulcus of the teeth to receive the desensitizer.

1.3 Using a disposable microapplicator, apply POTENZA ESENTE 2% desensitizing gel evenly over the teeth and wait at least 5 minutes, rubbing the tooth surfaces every 2 minutes.

1.4 Remove the gel and the retraction cord. Apply the desensitizer again over the teeth. Wait at least 5 minutes, rubbing the tooth surfaces every 2 minutes. Upon completion of this step, the desensitizing gel will have been in contact with the teeth for a minimum of 10 minutes.

2nd Session: This session should be scheduled 2 days after the previous one. Repeat the same steps as the 1st session.

3rd Session: Application of POTENZA ESENTE GLU-HEMA desensitizing solution.

3.1 Apply the lip retractor. Polish the dental surface with pumice stone and water to remove any deposits that may prevent contact of the product with the teeth.

3.2 Apply POTENZA ESENTE GLU-HEMA only to the exposed dentin area and allow the product to act for 45 seconds. Take care not to rub the product on the gingiva and do not exceed the specified time, as this may cause irritation to the soft tissues. After application, remove excess product with a cotton pellet. If necessary, rinse and dry the area.

4th Session: This session should be scheduled 2 days after the previous one. Repeat the same steps as the 3rd session.

PRE-BLEACHING DESENSITIZATION PROTOCOL:

Step 1: Apply the lip retractor. Polish the dental surface with pumice stone and water to remove any deposits that may prevent contact of the product with the teeth.

Step 2: Apply POTENZA ESENTE 2% desensitizing gel evenly over the teeth using the applicator tip or a disposable microapplicator.

Step 3: Allow the product to act for 5 minutes, performing rubbing motions with the disposable microapplicator. Then rinse and aspirate the contents. Take care to prevent the patient from ingesting the gel.

Step 4: As a complementary measure, to enhance the desensitizing effect and maximize patient comfort, it is suggested to combine the use of POTENZA ESENTE GLU-HEMA. Apply it only to the exposed dentin area and allow the product to act for 45 seconds. Take care not to rub the product on the gingiva and do not exceed the specified time, as this may cause irritation to the soft tissues. After application, remove excess product with a cotton pellet, rinse and dry the area.

Step 5: Begin whitening after the presented protocol, following the steps recommended by the whitening agent manufacturer.

Step 6: At the end of the whitening session, if the patient presents residual sensitivity or as a preventive measure, repeat steps 1 through 4. Post-whitening application contributes to immediate relief of discomfort and enhances the desensitizing effect.

CONSERVATION AND STORAGE:

- Keep the product in its original packaging;
- Protect from direct sunlight;
- Store the product at temperatures from 0°C to 30°C (32 °F to 86 °F).

TRANSPORT CONDITIONS:

- The product can be transported at temperatures between -5°C to 50°C (23°F to 122°F).
- Protect from direct sunlight.

MANUFACTURING DATE: SEE PACKAGING.

EXPIRATION DATE: 3 YEARS AFTER THE MANUFACTURE DATE.

USE EXCLUSIVELY IN DENTAL OFFICES. USE ONLY BY DENTAL PROFESSIONALS.

MAKE SURE THE INSTRUCTION FOR USE MATCHES THE PRODUCT TO BE USED.

TO ACCESS A PRINTED VERSION OF THE INSTRUCTION FOR USE, CONTACT THE COMPANY'S TECHNICAL SUPPORT.

KEEP THE PACKAGE CLOSED WHEN NOT IN USE.

Publication Date: 25/06/2026

Code: IFU-004

Version: 10



Potenza ESENTE

INSTRUCCIONES DE USO AL PROFESIONAL



PHS DO BRASIL LTDA

Calle Guilherme Boldt 210, Barrio: Zona Industrial Norte, Ciudad: Joinville,

Estado: Santa Catarina, País: Brasil - CEP: 89239-260

CNPJ: 17.910.389/0001-05 - INDUSTRIA BRASILEÑA

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Autorización de Operación MS: 8.11992.7 (X401M5619X7L)

Notificación en ANVISA nº 8.11992.79018



CINTERQUAL – Soluciones de Comercio

Internacional Lda; Avenida Defensores de Chaves, Nº 4

Escritório Idea Spaces – 1000-117

Lisboa – Portugal +351 967 417 654

Nombre Comercial del Producto: POTENZA ESENTE 2%.

Nombre Comercial Alternativo: AGENTE DESENSIBILIZANTE.

Nombre Técnico del Producto: SUSTANCIA PARA EL TRATAMIENTO DE HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA.

LEA CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTE INSTRUCTIVO HASTA QUE NO HAYA MÁS INTERACCIÓN DEL PRODUCTO CON SU PACIENTE.



Soporte Técnico

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br



COMPOSICIÓN BÁSICA:

Nitrato de potasio 6%, fluoruro de sodio 2%, humectante (glicerol), neutralizantes, espesantes y agua desionizada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA ESENTE 2% es un gel desensibilizante a base de nitrato de potasio al 6% y fluoruro de sodio al 2%, para uso tópico en consultorio dental. Actúa mediante un doble mecanismo de acción: el nitrato de potasio promueve acción neural, aumentando la concentración de potasio extracelular y despolarizando las membranas de las fibras nerviosas, bloqueando la transmisión del estímulo doloroso; el fluoruro de sodio actúa mediante la oclusión de los túbulos dentinarios, reduciendo la permeabilidad de la dentina y contribuyendo al alivio de la hipersensibilidad.

INDICACIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA ESENTE 2% está indicado para el tratamiento de dientes con hipersensibilidad baja a moderada. Fue desarrollado para atenuar la hipersensibilidad dental desencadenada por agentes térmicos y químicos, principalmente durante el blanqueamiento dental.

PRECAUCIONES:

- Mantener siempre alejado del calor y/o de la luz solar;
- No utilizar si es alérgico a alguno de los componentes del producto;
- No ingerir el producto;
- En caso de reacción alérgica, contactar al médico, farmacéutico o fabricante, presentando esta instrucción de uso;
- Producto no inyectable;
- No reutilizar el embalaje.

CONTRAINDICACIONES:

- POTENZA ESENTE 2% es contraindicado para personas alérgicas a alguno de los componentes de la fórmula.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS:

- La ingestión de grandes cantidades del producto puede causar náuseas.

ADVERTENCIAS:

- De uso exclusivamente odontológico, indicado por el odontólogo;
- El producto debe manipularse de acuerdo con las instrucciones de uso;
- Es responsabilidad del profesional verificar, antes del uso, si el producto es compatible y adecuado para la aplicación deseada;
- Mantener fuera del alcance de los niños;

- Antes de usar, inspeccione el aspecto del producto; si observa alguna anomalía, contacte al fabricante de inmediato;
- El fabricante no se responsabiliza por daños causados por uso inadecuado o manipulación incorrecta;
- En caso de incidentes graves relacionados con el uso del producto, estos deben ser comunicados al fabricante y a la autoridad competente;
- No reutilizar el envase vacío para otros fines;
- No reutilizar el producto. La reutilización puede causar contaminación microbiana cruzada, pérdida de eficacia y deterioro de la formulación, representando un riesgo para la seguridad del paciente;
- Para la eliminación segura del desensibilizante después del uso, siga la legislación local.

INSTRUCCIONES DE USO:

PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE HIPERSENSIBILIDAD DENTAL:

Se recomienda realizar 4 sesiones con un intervalo de 48 horas entre ellas:

1ª Sesión: Realizar 2 aplicaciones del producto: la primera utilizando un hilo retractor gingival y la segunda sin él.

1.1 Aplique el separador labial. Realice profilaxis con piedra pómez y agua sobre la superficie dental, eliminando cualquier depósito que pueda impedir el contacto del producto con los dientes.

1.2 Inserte el hilo retractor gingival (sin hemostático) en el interior del surco gingival de los dientes que recibirán el desensibilizante.

1.3 Con ayuda de un microaplicador descartable, aplique el gel desensibilizante POTENZA ESENTE 2% uniformemente sobre los dientes y espere un mínimo de 5 minutos, friccionando la superficie de los dientes cada 2 minutos.

1.4 Retire el gel y el hilo retractor. Aplique nuevamente el desensibilizante sobre los dientes. Espere un mínimo de 5 minutos, friccionando la superficie de los dientes cada 2 minutos. Al completar este paso, el gel desensibilizante habrá mantenido contacto con los dientes por un mínimo de 10 minutos.

2ª Sesión: Esta sesión debe programarse 2 días después de la anterior. Repita los mismos pasos de la 1ª sesión.

3ª Sesión: Aplicación de la solución desensibilizante POTENZA ESENTE GLU-HEMA.

3.1 Aplique el separador labial. Realice profilaxis con piedra pómez y agua sobre la superficie dental, eliminando cualquier depósito que pueda impedir el contacto del producto con los dientes.

3.3 Aplique POTENZA ESENTE GLU-HEMA únicamente en el área de dentina expuesta y deje actuar el producto durante 45 segundos. Tenga cuidado de no friccionar el producto en la encía y no exceda el tiempo determinado, ya que esto puede causar irritación en los tejidos blandos. Después de la aplicación, retire el exceso de producto con una bolita de algodón. Si es necesario, lave y seque la zona.

4ª Sesión: Esta sesión debe programarse 2 días después de la anterior. Repita los mismos pasos de la 3ª sesión.

PROTOCOLO DE DESENSIBILIZACIÓN PRE - BLANQUEAMIENTO:

Paso 1: Aplique el separador labial. Realice profilaxis con piedra pómez y agua sobre la superficie dental, eliminando cualquier depósito que pueda impedir el contacto del producto con los dientes.

Paso 2: Aplique el gel desensibilizante POTENZA ESENTE 2% uniformemente sobre los dientes, con ayuda de la punta aplicadora o un microaplicador descartable.

Paso 3: Deje actuar el producto durante 5 minutos, realizando movimientos de fricción con el microaplicador descartable. Luego, lave y aspire el contenido. Tenga cuidado de que el paciente no ingiera el gel.

Paso 4: De manera complementaria, para potenciar el efecto desensibilizante y maximizar el confort del paciente, se sugiere asociar el uso del producto POTENZA ESENTE GLU-HEMA. Aplíquelo únicamente en el área de dentina expuesta y deje actuar el producto durante 45 segundos. Tenga cuidado de no friccionar el producto en la encía y no exceda el tiempo determinado, ya que esto puede causar irritación en los tejidos blandos. Después de la aplicación, retire el exceso de producto con una bolita de algodón, lave y seque la zona.

Paso 5: Iniciar el blanqueamiento después del protocolo presentado, siguiendo los pasos recomendados por el fabricante del agente blanqueador.

Paso 6: Al término de la sesión de blanqueamiento, en caso de que el paciente presente sensibilidad residual o como medida preventiva, repita los pasos del 1 al 4. La aplicación post-blanqueamiento contribuye al alivio inmediato del malestar y potencia el efecto desensibilizante.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en su embalaje original;
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa;
- Conservar el producto a temperaturas de 0°C y 30°C.

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

- El producto puede ser transportado a temperaturas entre -5°C y 50°C;
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa.

FECHA DE FABRICACIÓN: VER EMBALAJE**FECHA DE CADUCIDAD: 3 AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS. SOLO PARA USO DE PROFESIONALES DEL ÁREA ODONTOLÓGICA.

ASEGÚRESE DE QUE LAS INSTRUCCIONES DE USO CORRESPONDAN AL PRODUCTO QUE SE VA A UTILIZAR.

PARA ACCEDER A LA VERSIÓN IMPRESA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SOPORTE TÉCNICO DE LA EMPRESA.

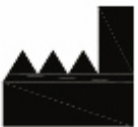
MANTENGA EL EMBALAJE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.

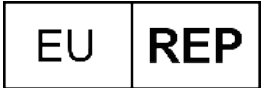
Fecha de Publicación: 25/06/2026

Código: IFU-004

Versión: 10

PICTOGRAMAS / PICTOGRAMS / PICTOGRAMAS

	Data de Fabricação Manufacture Date Fecha de Fabricación		Número de Referência Reference Number Numero de Referencia
	Data de Validade Expiration Date Fecha de Caducidad		Dispositivo Médico Medical Device Dispositivo Médico
	Fabricante Manufacturer Identification Fabricante		Identificação Única do Dispositivo Unique Device Identifier Identificación Única del Dispositivo
	Marcação CE CE Marking Marcado CE		Código de Lote Lot Code Código de Lote

	Mandatário na Comunidade Europeia/União Europeia Authorised Representative in the European Community/European Union Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia		Manter Longe da Luz Solar Keep Away From Sunlight Mantener Alejado de la Luz Solar
	Consultar as Instruções de Utilização Eletrônicas Consult the Electronic Instructions for Use Consultar las Instrucciones de Uso Electrónicas		Manter Seco Keep Dry Mantener Seco
	Não Estéril Non-Sterile No Estéril		Manter Fora do Alcance das Crianças Keep Out of Reach of Children Mantener Fuera del Alcance de los Niños

	Limites de Temperatura Temperature Limits Límites de Temperatura		Plástico Polipropileno Polypropylene Plastic Plástico Polipropileno
	Não Reutilizar Do Not Reuse No reutilizar		