

POTENZA ATTACCO

INSTRUÇÕES DE USO AO PROFISSIONAL

PHS DO BRASIL LTDA

Rua Ottokar Doerffel, 1112, Bairro: Atiradores,

Cidade: Joinville, Estado: SC, País:

Brasil CEP: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05

INDÚSTRIA BRASILEIRA

E-MAIL: vendas@phsdo brasil.com.br

Autorização de Funcionamento MS: X401M5619X7L(8.11992.7)

Registro na ANVISA nº 8.11992.79014

Responsável Técnico: ÉLEN ALVES LOOS - CRQ/SC N. 13303733



Nome Comercial Do Produto: POTENZA ATTACCO
CONDICIONADOR ÁCIDO 35%.

Nome Técnico do Produto: CONDICIONADOR ÁCIDO
FOSFÓRICO 35%.

**LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA
INSTRUÇÃO DE USO ANTES DE APLICAR O PRODUTO.**

**GUARDE PARA CONSULTA ATÉ O CONSUMO TOTAL DO
PRODUTO. GUARDE ESTA INSTRUÇÃO ATÉ NÃO HAVER MAIS
INTERAÇÃO DO PRODUTO COM O SEU PACIENTE.**

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Ácido fosfórico a 35%, corante, espessantes e água deionizada.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA ATTACCO 35% é um condicionador ácido à base de ácido fosfórico a 35%, disponível na forma de gel tixotrópico e coloração azul intensa. Com ótima viscosidade, o gel se restringe apenas ao local onde é aplicado - sem escoar para áreas adjacentes. Sua coloração bastante marcante permite fácil visualização do local de aplicação.

INDICAÇÃO DO PRODUTO:

Indicado para condicionamento ácido de esmalte e dentina, passo que antecede a aplicação de adesivos. Seu objetivo é aumentar as microporosidades nos tecidos, consequentemente maximizando a retenção mecânica do adesivo.

PRECAUÇÕES:

- Manter afastado de luz solar.
- O contato do produto com os olhos e/ou pele pode causar queimaduras;
- A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas. O profissional deverá orientar o paciente para não ingerir o produto. Se o paciente acidentalmente engolir um grande volume do produto, o profissional deverá levá-lo para o Pronto Atendimento junto com as instruções de uso do produto;
- Produto não injetável;
- Não reutilize a embalagem;
- Ao menor sinal de alergia, suspender o uso imediatamente.

CONTRA INDICAÇÕES:

POTENZA ATTACCO 35% é contraindicado para pessoas com relato de alergia a algum dos componentes da fórmula.

EFEITOS COLATERAIS:

A permanência do produto sobre a superfície dental por tempo

superior ao indicado pode causar desmineralização excessiva dos tecidos.

ADVERTÊNCIAS:

- Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado;
- Exclusivo para uso odontológico;
- Deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso;
- É de responsabilidade do profissional comprovar, antes da utilização do produto, se o mesmo é compatível e adequado para a utilização desejada;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Antes de utilizar observe o aspecto do produto, caso perceba alguma anomalia entre em contato imediatamente com o fabricante;
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso inadequado ou por manipulação incorreta;
- Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins;
- Para realizar o descarte do produto, siga a legislação local.

INSTRUÇÕES DE USO:

1º Passo: Isole a região a receber o produto, preferencialmente com isolamento absoluto. O substrato deve estar limpo e seco;

2º Passo: Aplique o produto em toda a área onde se deseja o condicionamento ácido. Em esmalte, deixe o produto agir por 30 segundos. Em dentina, deixe o produto agir por 15 segundos;

Observação: A parede pulpar de preparos cavitários profundos deve ser protegida com base forradora (ex.: cimento de ionômero de vidro) antes da aplicação do produto.

3º Passo: Lave abundantemente a área condicionada com água deionizada, pelo menos por tempo igual ao da aplicação;

4º Passo: Após total remoção do ácido, mantenha o substrato seco ou úmido conforme recomendação do sistema adesivo a ser utilizado;

Observação: Em determinados adesivos autocondicionantes, não recomenda-se aplicar o produto em dentina.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

- Manter o produto na embalagem original;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazene o produto em temperaturas entre 0 °C a 30°C.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:


- O produto pode ser transportado em temperaturas entre -5°C e 50°C;
- Proteger da incidência da luz solar direta.

DATA DE FABRICAÇÃO VIDE EMBALAGEM.

PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.

PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. SOMENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA.


MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

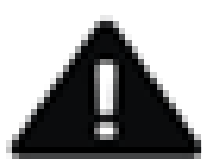


SIGA AS INSTRUÇÕES DE USO CORRETAMENTE




DESTINE APENAS À UTILIZAÇÃO MEDIANTE PRESCRIÇÃO

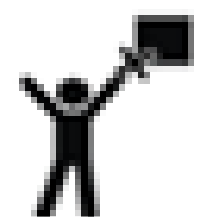


MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

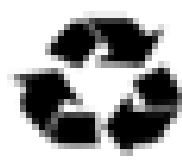

EMBALAGEM RECICLÁVEL

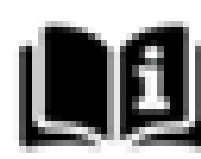

VIDE MANUAL DE INSTRUÇÃO

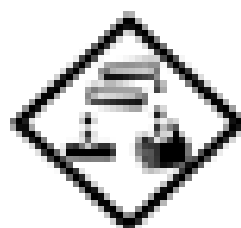

CORROSIVO



IRRITANTE

POTENZA ATTACCO

INSTRUCTIONS FOR USE FOR PROFESSIONALS

PHS DO BRASIL LTDA

Street Ottokar Doerffel, 1112, District: Atiradores, City: Joinville,

State: Santa Catarina, Country: Brasil Zip Code: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05

BRAZILIAN INDUSTRY

E-MAIL: contato@phsdobrasil.com.br

Health Ministry's Operating Licence: X401M5619X7L(8.11992.7)

Registry at ANVISA number 8.11992.79014

Technical Manager: ÉLEN ALVES LOOS - CRQ/SC N. 13303733



Technical Support

0800-000-3780

www.phsdobrasil.com.br

Product's Name: POTENZA ATTACCO 35%

Product's technical name: ACID ETCHANT OF PHOSPHORIC ACID AT 35%

READ ALL INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.

KEEP THIS DOCUMENT UNTIL THERE IS NO MORE INTERACTION OF THE PRODUCT WITH YOUR PATIENT.

BASIC COMPOSITION:

Phosphoric acid at 35%, dye, thickeners and deionized water.

PRODUCT'S DESCRIPTION:

POTENZA ATTACCO is a thixotropic gel based on phosphoric acid at 35%. It is indicated for acid etching of enamel and/or dentin, increasing bond strength of resin materials to the tooth's surface. Its proper viscosity allows easier handling as the gel does not run off from the area of application. The product's blue color helps identifying the application area. Potenza Attacco 35% provides an etching depth of about 2,0µm.

PRODUCT'S INDICATION:

Indicated for etching of enamel and/or dentin prior to adhesive application.

PRECAUTIONS:

- Keep away from sunlight.
- The contact of the product with eyes and/or skin can cause burning. Ingestion of big quantities of the product can cause nausea.
- The professional should instruct the patient not to swallow the product. If the patient swallows a big quantity of it and present any side effect, the professional should take him/her to get medical assistance, along with this instructions manual.
- This product is not for injection. Do not reuse the package.

CONTRAINDICATIONS:

POTENZA ATTACCO is contraindicated for individuals with history of allergic reactions to any of the components of the formula.

SIDE EFFECTS:

If the product remains on the dental tissues for longer periods than recommended, excessive demineralization may occur.

WARNINGS:

Do not use the product after its expiry date. This product is exclusive for dental use according to this document. It is of full responsibility of the professional to make sure, before using the product, if it is compatible to the desired use.

Keep out of children's reach.

Before using the product, observe the aspect of it. If any variation is noticed, contact the manufacturer immediately. The manufacturer does not take responsibility for eventual damages caused by inadequate use or incorrect manipulation. Do not reuse the empty package. For proper product disposal, follow local legislation.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1st STEP: Clean and dry the dental surface to be etched. Control the area with relative or total dam isolation.

2nd STEP: Apply Potenza Attacco on the area to be etched. Leave it for 30 seconds on enamel and 15 seconds on dentin. Attention: the pulp wall of deep cavity preparations must be protected with GIC or calcium hydroxide before Potenza Attacco application.

3rd STEP: Rinse the etched area abundantly.

4th STEP: Dry enamel and leave dentin moist (to avoid collapse of the collagen fibers).

Note: Depending on the chosen adhesive system (i.e. self etching adhesives), Potenza Attacco 35% must not be applied to dentin.

CONSERVATION AND STORAGE:

Keep the product in its original package. Protect it from direct sunlight. Keep it in temperatures between 0°C to 30°C (32o F to 86o F).

TRANSPORTATION CONDITIONS:

Product must be transported in temperatures between -5°C e 50°C (23o F to 122o F). Protect it from direct sunlight.


DATE OF MANUFACTURE: see package

EXPIRY DATE: 2 YEARS AFTER DATE OF MANUFACTURE

SALES UNDER PRESCRIPTION (ACCORDING TO RDC N° 6 OF 2015).

PRODUCT FOR EXCLUSIVE USE IN DENTAL OFFICE AND ONLY BY DENTAL PROFESSIONALS.


WHEN NOT IN USE, KEEP THE PRODUCT'S PACKAGE CLOSED.

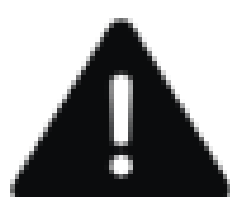


**FOLLOW INSTRUCTIONS
FOR USE CORRECTLY**



**INTENDED FOR USE
ONLY BY PRESCRIPTION**

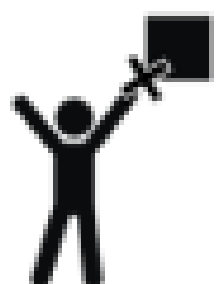

**KEEP THE PRODUCT
OUT OF THE REACH OF
CHILDREN**

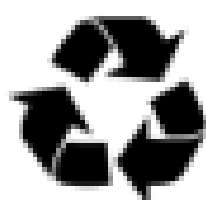

**RECYCLABLE
PACKING**



**SEE INSTRUCTION
MANUAL**



CORROSIVE

MI0075 – REV. 00

POTENZA ATTACCO

Instrucciones de uso al

PHS DO BRASIL LTDA

Calle Ottokar Doerffel, 1112, Barrio:
Atiradores, Ciudad: Joinville, Estado: SC, País:
Brasil CEP: 89203-212
CNPJ: 17.910.389/0001-05
INDUSTRIA BRASILEÑA
E-MAIL: contato@phsdobrasil.com.br
Autorización de Operación MS: X401M5619X7L(8.11992.7)
Registro en ANVISA nº 81199279014
Gerente Técnico: ÉLEN ALVES LOOS - CRQ/SC N. 13303733

Nombre comercial del producto: POTENZA ATTACCO
CONDICIONADOR ÁCIDO 35%.

Nombre técnico del producto: ACONDICIONADOR ÁCIDO
FOSFÓRICO 35%.

**POR FAVOR, LEA TODA LA INFORMACIÓN EN ESTA
INSTRUCCIÓN ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.
GUARDE ESTE MATERIAL PARA SU CONSULTA HASTA EL
CONSUMO TOTAL DEL PRODUCTO.
GUARDE ESTA INSTRUCCIÓN HASTA QUE NO HAYA MÁS
INTERACCIÓN DEL PRODUCTO CON SU PACIENTE.**

COMPOSICIÓN BÁSICA:

Ácido fosfórico a 35%, tinte, espesantes y agua desionizada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA ATTACCO 35% es un acondicionador a base de ácido fosfórico al 35%, disponible en forma de gel tixotrópico y coloración azul intenso. Con una excelente viscosidad, el gel está restringido solo al lugar donde se aplica. - sin filtrarse a áreas adyacentes. Su colorido muy llamativo permite una fácil visualización de la ubicación de la aplicación.

INDICACIÓN DEL PRODUCTO:

Indicado para acondicionamiento ácido de esmalte y dentina, paso previo a la aplicación de adhesivos. Su objetivo es aumentar las microporosidades en los tejidos maximizando así la retención mecánica del adhesivo.

PRECAUCIONES:

- Mantenerlo alejado de la luz solar.
- El contacto del producto con los ojos y/o la piel puede causar quemaduras;
- La ingestión de grandes cantidades del producto puede causar náuseas. El profesional debe orientar al paciente para que no ingiera el producto. Si el paciente traga accidentalmente un gran volumen del producto, el profesional debe llevarlo a la sala de emergencias junto con las instrucciones para usar el producto;
- Producto no inyectable;
- No reutilizar el embalaje;
- Al menor signo de alergia, suspenda el uso inmediatamente.

CONTRAINDICACIONES:

POTENZA ATTACCO 35% contraindicado para personas con un informe de alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

La permanencia del producto en la superficie dental durante más tiempo del indicado puede provocar una desmineralización excesiva de los tejidos.

ADVERTENCIAS

- Nunca use el producto si ha caducado;
- Exclusivo para uso odontológico;
- Deve manejarse de acuerdo con las instrucciones de uso;
- Es responsabilidad del profesional probar, antes del uso del producto, si es compatible y adecuado para el uso deseado;
- Mantener fuera del alcance de los niños;
- Antes de usar, observe la apariencia del producto, si nota alguna anomalía, comuníquese con el fabricante de inmediato;
- El fabricante no es responsable de los daños causados por un uso inadecuado o un manejo inadecuado;

- No reutilizar el embalaje vacío para otros fines;
- Para deshacerse del producto, siga la legislación local.

INSTRUCCIONES DE USO:

1° Paso: Aislar la región receptora del producto, preferiblemente con aislamiento absoluto. El sustrato debe estar limpio y seco.

2° Paso: Aplique el producto en toda el área donde se desea el acondicionamiento ácido. En el esmalte, deje que el producto actúe durante 30 segundos. En la dentina, deje que el producto actúe durante 15 segundos.

Observación: La pared pulpar de las preparaciones de cavidad profunda debe estar protegida con base de forración (ej.: cemento de ionómero de vidrio) antes de aplicar el producto.

3° Paso: Lavar copiosamente el área acondicionada con agua desionizada, al menos durante un tiempo igual al de la aplicación.

4° Paso: Después de la eliminación total del ácido, mantenga el sustrato seco o húmedo según lo recomendado por el sistema adhesivo a utilizar.

Observación: En ciertos adhesivos auto condicionantes, no se recomienda aplicar el producto en dentina.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en su embalaje original;
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa;
- Almacene el producto a temperaturas entre 0°C a 30 °C.

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

- El producto puede ser transportado a temperaturas entre -5°C y 50°C;
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa.

FECHA DE FABRICACIÓN:

VER EMBALAJE

VIGENCIA:

Dos años después de la fecha de fabricación.

VENTA CON RECETA MÉDICA - (CONFORME RDC N° 6 DE 2015).

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN CONSULTORIO DENTAL.
SOLO PARA USO DE PROFESIONALES DENTALES.**

MANTENGA EL EMBALAJE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.



**SIGA LAS
INSTRUCCIONES DE
USO CORRECTAS**



**DESTINE SOLO PARA
USO CON RECETA**



**MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS
NIÑOS**



**ENVASES
RECICLABLES**



**VER MANUAL DE
INSTRUCCIONES**



CORROSIVO



IRRITANTE