

POTENZA ESENTE 0,2%

INSTRUÇÕES DE USO AO PROFISSIONAL

PHS DO BRASIL LTDA

Rua Ottokar Doerffel, 1112, Bairro: Atiradores, Cidade: Joinville,

Estado: SC, País: Brasil, CEP: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05

INDÚSTRIA BRASILEIRA

E-MAIL: vendas@phsdo brasil.com.br

Autorização de Funcionamento MS: X401M5619X7L(8.11992.7)

Registro na ANVISA nº 8.11992.79018

Responsável Técnico: ÉLEN ALVES LOOS - CRQ/SC N. 13303733



Nome Comercial Do Produto: POTENZA ESENTE 0,2%.

Nome Técnico do Produto: SUBSTÂNCIA PARA TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA.

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA INSTRUÇÃO DE USO ANTES DE APLICAR O PRODUTO.

GUARDE PARA CONSULTA ATÉ O CONSUMO TOTAL DO PRODUTO. GUARDE ESTA INSTRUÇÃO ATÉ NÃO HAVER MAIS INTERAÇÃO DO PRODUTO COM O SEU PACIENTE.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Nitrato de Potássio a 6%, Fluoreto de Sódio 0,2%, Umectante (Glicerol), Neutralizantes, Espessantes e Água Deionizada.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA ESENTE 0,2% é um gel dessensibilizante à base de nitrato de potássio a 6% e fluoreto de sódio à 0,2% para uso tópico, aplicado em moldeiras individuais pelo paciente em domicílio sob acompanhamento profissional.

INDICAÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA ESENTE 0,2% é indicado no tratamento de dentes com hipersensibilidade baixa a moderada. Foi desenvolvido para atenuar a hipersensibilidade dental desencadeada por agentes térmicos e químicos, principalmente durante o clareamento dental.

PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES:

- Mantenha sempre afastado do calor e/ou luz solar;
- Não utilizar se for alérgico aos componentes do produto;
- Não ingerir o produto;
- Em caso de reações alérgicas, encaminhe o paciente para atendimento médico de posse desse documento;
- Produto não injetável;
- Não reutilize a embalagem.

EFEITOS ADVERSOS:

- A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas.

ADVERTÊNCIAS:

- Somente para uso odontológico e indicado pelo dentista;
- Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado;
- O produto deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso;

- É de responsabilidade do profissional comprovar, antes da utilização do produto, se o mesmo é compatível e adequado para a utilização desejada;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Antes de utilizar, observe o aspecto do produto, caso perceba alguma anomalia entre em contato imediatamente com o fabricante;
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso inadequado ou por manipulação incorreta;
- Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins;
- Para realizar o descarte do produto, siga a legislação local.

INSTRUÇÕES DE USO:

Estas instruções deverão ser repassadas ao paciente.

1º Passo: Antes de realizar o clareamento dental, faça a escovação e aplicação do fio dental, removendo quaisquer sujidades da superfície;

2º Passo: Aplique, com auxílio da ponteira aplicadora, o gel dessensibilizante **POTENZA ESENTE 0,2%** na moldeira de clareamento dental. Aplique uma pequena porção no espaço correspondente aos dentes que serão clareados. Adapte a moldeira no arco dental e pressione levemente para envolver a superfície com o gel;

3º Passo: Deixe agir por 15 minutos. Retire a moldeira e realize bochechos com água para remover todo o gel dessensibilizante da superfície dental. É importante orientar o paciente a não engolir o produto.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

- Manter o produto na embalagem original;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazene o produto em temperaturas de 0°C a 30°C.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

- O produto pode ser transportado a temperaturas entre -5 °C e 50 °C;

- Proteger da incidência da luz solar direta.

DATA DE FABRICAÇÃO: VIDE EMBALAGEM.

PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO

VENDA SOB PRESCRIÇÃO - (CONFORME RDC Nº 6 DE 2015).

MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

IMPORTANTE: SUSPENDER O USO DO PRODUTO EM CASO DE REAÇÕES ALÉRGICAS.



**SIGA AS INSTRUÇÕES DE
USO CORRETAMENTE**




**DESTINE APENAS À
UTILIZAÇÃO MEDIANTE
PRESCRIÇÃO**



**MANTENHA O PRODUTO
FORA DO ALCANCE
DE CRIANÇAS**



**EMBALAGEM
RECICLÁVEL**

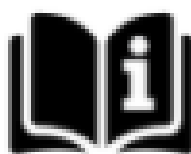

**VIDE MANUAL
DE INSTRUÇÃO**

POTENZA ESENTE 0,2%

INSTRUÇÕES DE USO AO PACIENTE

PHS DO BRASIL LTDA

Rua Ottokar Doerffel, 1112, Bairro: Atiradores, Cidade: Joinville,

Estado: SC, País: Brasil CEP: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05

INDÚSTRIA BRASILEIRA

EMAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Autorização de Funcionamento MS: X401M5619X7L(8.11992.7)

Registro na ANVISA nº 8.11992.79018

Responsável Técnico:ÉLEN ALVES LOOS - CRQ/SC N. 13303733



Nome Comercial Do Produto: POTENZA ESENTE 0,2%.

Nome Técnico do Produto: SUBSTÂNCIA PARA TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA.

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA INSTRUÇÃO DE USO ANTES DE APLICAR O PRODUTO.

GUARDE PARA CONSULTA ATÉ O CONSUMO TOTAL DO PRODUTO. GUARDE ESTA INSTRUÇÃO ATÉ NÃO HAVER MAIS INTERAÇÃO DO PRODUTO COM O SEU PACIENTE.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Nitrato de potássio a 6%, fluoreto de sódio 0,2%, umectante (glicerol), neutralizantes, espessantes e água deionizada.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA ESENTE 0,2% é um gel dessensibilizante à base de nitrato de potássio a 6% e fluoreto de sódio à 0,2% para uso tópico, aplicado em moldeiras individuais pelo paciente em domicílio sob acompanhamento profissional.

INDICAÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA ESENTE 0,2% é indicado no tratamento de dentes com hipersensibilidade baixa a moderada. Foi desenvolvido para atenuar a hipersensibilidade dental desencadeada por agentes térmicos e químicos, principalmente durante o clareamento dental.

PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES:

- Mantenha sempre afastado do calor e/ou luz solar;
- Não utilizar se for alérgico aos componentes do produto;
- Não ingerir o produto;
- Em caso de reações alérgicas, encaminhe o paciente para atendimento médico de posse desse documento;
- Produto não injetável;
- Não reutilize a embalagem.

EFEITOS ADVERSOS:

A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas.

ADVERTÊNCIAS:

- Somente para uso odontológico e indicado pelo dentista;
- Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado;

- O produto deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso;
- É de responsabilidade do profissional comprovar, antes da utilização do produto, se o mesmo é compatível e adequado para a utilização desejada;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Antes de utilizar, observe o aspecto do produto, caso perceba alguma anomalia entre em contato imediatamente com o fabricante;
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso inadequado ou por manipulação incorreta;
- Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins;
- Para realizar o descarte do produto, siga a legislação local.

INSTRUÇÕES DE USO PARA O PACIENTE:

1º Passo: Antes de realizar o clareamento dental, faça a escovação e aplicação do fio dental, removendo quaisquer sujidades da superfície;

2º Passo: Aplique, com auxílio da ponteira aplicadora, o gel dessensibilizante POTENZA ESENTE 0,2% na moldeira de clareamento dental. Aplique uma pequena porção no espaço correspondente aos dentes que serão clareados. Adapte a moldeira no arco dental e pressione levemente para envolver a superfície com o gel;

3º Passo: Deixe agir por 15 minutos ou pelo tempo recomendado pelo seu dentista. Retire a moldeira e realize bochechos com água para remover todo o gel dessensibilizante da superfície dental.

IMPORTANTE: evite deglutir o gel e contate seu dentista caso haja quaisquer dúvidas.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

- Manter o produto na embalagem original;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazene o produto em temperaturas de 0°C a 30°C.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

- O produto pode ser transportado a temperaturas entre -5 °C e 50 °C;
- Proteger da incidência da luz solar direta.

DATA DE FABRICAÇÃO: VIDE EMBALAGEM

PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.

PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. SOMENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA.

MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.



SIGA AS INSTRUÇÕES DE USO CORRETAMENTE




DESTINE APENAS À UTILIZAÇÃO MEDIANTE PRESCRIÇÃO



MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS



EMBALAGEM RECICLÁVEL

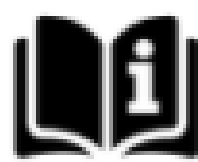

VIDE MANUAL DE INSTRUÇÃO

POTENZA ESENTE 0,2%

INSTRUCTIONS FOR USE FOR PROFESSIONALS

PHS DO BRASIL LTDA

Rua Ottokar Doerffel, 1112, District: Atiradores, City: Joinville, Estado: SC,

País: Brazil CEP [Zip Code]: 89203-212

CNPJ [Corporate Taxpayer's ID]: 17.910.389/0001-05

BRAZILIAN INDUSTRY

EMAIL: vendas@phsdobrasil.com.br

Operating License MS: X401M5619X7L(8.11.992-7)

ANVISA Registration #81199279018

Technical Officer: ÉLEN ALVES LOOS - CRQ/SC

[Chemist License] #13303733



Technical Support

0800-000-3780

www.phsdobrasil.com.br

Product Trade Name: POTENZA ESENTE 0,2%

Product Technical Name: SUBSTANCE FOR TREATMENT OF DENTIN HYPERSENSITIVITY

READ CAREFULLY ALL THE INFORMATION IN THIS INSTRUCTION FOR USE BEFORE APPLYING THE PRODUCT.

KEEP THIS INSTRUCTION UNTIL THERE IS NO FURTHER INTERACTION OF THE PRODUCT WITH YOUR PATIENT.

BASIC COMPOSITION:

Potassium nitrate at 6%, sodium fluoride 0.2%, wetting (glycerol), neutralizers, thickeners and deionized water.

PRODUCT DESCRIPTION:

POTENZA ESENTE 0,2% is a desensitizing gel based on 6% potassium nitrate and 0.2% sodium fluoride for topical use, applied to individual trays by the patient at home under professional follow-up.

PRODUCT INDICATION:

POTENZA ESENTE 0,2% is indicated for the treatment of teeth with low to moderate hypersensitivity. It was developed to attenuate dental hypersensitivity caused by thermal and chemical agents, especially during tooth bleaching.

PRECAUTIONS AND CONTRAINDICATIONS:

- Always keep away from heat and/or sunlight.
- Do not use if you are allergic to the components of the product.
- Do not ingest the product.
- In case of allergic reaction, refer the patient to emergency medical service with this document at hand.
- Non-injectable product.
- Do not reuse the packaging.

SIDE EFFECTS:

- Ingestion of large amounts of the product may cause nausea.

WARNING:

- Dental use only and as indicated by the dentist.
- Never use the product if it has expired.
- The product must be handled according to the instructions for use.
- It is the responsibility of the professional to prove, before the use of the product, whether it is compatible and suitable for the intended use.
- Keep out of reach of children.
- Before using, notice the appearance of the product, if you notice any anomaly, contact the manufacturer immediately.

- The manufacturer is not responsible for damage caused by improper use or improper handling.
- Do not reuse the empty packaging for other purposes.
- To dispose of the product, please follow local legislation.

INSTRUCTIONS FOR USE:

These instructions should be passed on to the patient.

Step 1: Before performing dental bleaching, brush and floss, removing any dirt from the surface.

Step 2: With the aid of the tip applicator, apply the **POTENZA ESENTE 0,2%** desensitizing gel in the dental bleaching tray. Apply a small portion to the space corresponding to the teeth that will be bleached. Adapt the tray to the dental arch and press lightly to wrap the surface with the gel.

Step 3: Leave to act for 15 minutes. Remove the tray and rinse with water to remove all desensitizing gel from the dental surface. It is important to instruct the patient not to swallow the product.

CONSERVATION AND STORAGE:

- Keep the product in its original packaging.
- Protect from the incidence of direct sunlight.
- Store the product at temperatures from 0 °C to 30 °C.

TRANSPORT CONDITIONS:

- The product can be transported at temperatures between -5 °C and 50 °C.
- Protect from the incidence of direct sunlight.

MANUFACTURING DATE:

SEE PACKAGING.

SHELF LIFE:

TWO YEARS AFTER THE MANUFACTURING DATE.

PRODUCT OF EXCLUSIVE USE IN DENTAL OFFICE. ONLY FOR USE OF DENTAL PROFESSIONALS.

KEEP THE PACKAGING CLOSED WHEN NOT IN USE.



**FOLLOW THE INSTRUCTIONS
FOR USE CORRECTLY**



**INTENDED FOR
PRESCRIPTION USE
ONLY**



**KEEP OUT OF
REACH OF
CHILDREN**



**RECYCLABLE
PACKAGING**



**SEE INSTRUCTION
MANUAL**

MI0017 - REV. 03

POTENZA ESENTE **0,2%**

INSTRUCTIONS FOR USE FOR PATIENTS

PHS DO BRASIL LTDA

Rua Ottokar Doerffel, 1112, District: Atiradores, City: Joinville, Estado: SC,

País: Brazil CEP [Zip Code]: 89203-212

CNPJ [Corporate Taxpayer's ID]: 17.910.389/0001-05

BRAZILIAN INDUSTRY

EMAIL: vendas@phsdobrasil.com.br

Operating License MS: X401M5619X7L(8.11.992-7)

ANVISA Registration #81199279018

Technical Officer: ÉLEN ALVES LOOS - CRQ/SC

[Chemist License] #13303733



Technical Support

0800-000-3780

www.phsdobrasil.com.br

Product Trade Name: POTENZA ESENTE 0,2%

Product Technical Name: SUBSTANCE FOR TREATMENT OF DENTIN HYPERSENSITIVITY

READ CAREFULLY ALL THE INFORMATION IN THIS INSTRUCTION FOR USE BEFORE APPLYING THE PRODUCT.

KEEP THIS INSTRUCTION UNTIL THERE IS NO FURTHER INTERACTION OF THE PRODUCT WITH YOUR PATIENT.

BASIC COMPOSITION:

Potassium nitrate at 6%, sodium fluoride 0.2%, wetting (glycerol), neutralizers, thickeners and deionized water.

PRODUCT DESCRIPTION:

POTENZA ESENTE 0,2% is a desensitizing gel based on 6% potassium nitrate and 0.2% sodium fluoride for topical use, applied to individual trays by the patient at home under professional follow-up.

PRODUCT INDICATION:

POTENZA ESENTE 0,2% is indicated for the treatment of teeth with low to moderate hypersensitivity. It was developed to attenuate dental hypersensitivity caused by thermal and chemical agents, especially during tooth bleaching.

PRECAUTIONS AND CONTRAINDICATIONS:

- Always keep away from heat and/or sunlight.
- Do not use if you are allergic to the components of the product.
- Do not ingest the product.
- In case of allergic reaction, refer the patient to emergency medical service with this document at hand.
- Non-injectable product.
- Do not reuse the packaging.

SIDE EFFECTS:

- Ingestion of large amounts of the product may cause nausea.

WARNING:

- Dental use only and as indicated by the dentist.
- Never use the product if it has expired.
- The product must be handled according to the instructions for use.
- It is the responsibility of the professional to prove, before the use of the product, whether it is compatible and suitable for the intended use.
- Keep out of reach of children.
- Before using, notice the appearance of the product, if you notice any anomaly, contact the manufacturer immediately.

- The manufacturer is not responsible for damage caused by improper use or improper handling.
- Do not reuse the empty packaging for other purposes.
- To dispose of the product, please follow local legislation.

INSTRUCTIONS FOR USE FOR PATIENTS:

Step 1: Before performing dental bleaching, brush and floss, removing any dirt from the surface.

Step 2: With the aid of the tip applicator, apply the POTENZA ESENTE 0,2% desensitizing gel in the dental bleaching tray. Apply a small portion to the space corresponding to the teeth that will be bleached. Adapt the tray to the dental arch and press lightly to wrap the surface with the gel.

Step 3: Leave to act for 15 minutes or for the time recommended by your dentist. Remove the tray and rinse with water to remove all desensitizing gel from the dental surface.

IMPORTANT: Avoid swallowing the gel and contact your dentist if you have any questions.

CONSERVATION AND STORAGE:

- Keep the product in its original packaging.
- Protect from the incidence of direct sunlight.
- Store the product at temperatures from 0 °C to 30 °C.

TRANSPORT CONDITIONS:

- The product can be transported at temperatures between -5 °C and 50 °C.
- Protect from the incidence of direct sunlight.

MANUFACTURING DATE:

SEE PACKAGING.

SHELF LIFE:

TWO YEARS AFTER THE MANUFACTURING DATE.

PRODUCT OF EXCLUSIVE USE IN DENTAL OFFICE. ONLY FOR USE OF DENTAL PROFESSIONALS.

KEEP THE PACKAGING CLOSED WHEN NOT IN USE.



**FOLLOW THE INSTRUCTIONS
FOR USE CORRECTLY**




**INTENDED FOR
PRESCRIPTION USE
ONLY**



**KEEP OUT OF
REACH OF
CHILDREN**



**RECYCLABLE
PACKAGING**

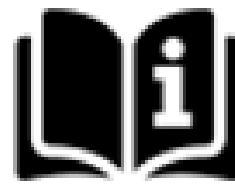

**SEE INSTRUCTION
MANUAL**

POTENZA ESENTE 0,2%

Instrucciones de uso al

PHS DO BRASIL LTDA

Calle Ottokar Doerffel, 1112, Barrio:
Atiradores, Ciudad: Joinville, Estado: SC, País:

Brasil CEP: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05

INDUSTRIA BRASILEÑA

E-MAIL: contato@phsdobrasil.com.br

Autorización de Operación MS: X401M5619X7L(8.11992.7)

Registro en ANVISA nº 81199279018

Gerente Técnico: ÉLEN ALVES LOOS - CRQ/SC N. 13303733

Nombre comercial del producto: POTENZA ESENTE 0,2%

Nombre técnico del producto: SUSTANCIA PARA EL
TRATAMIENTO DE HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA

**POR FAVOR, LEA TODA LA INFORMACIÓN EN ESTA
INSTRUCCIÓN ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.**

**GUARDE ESTA INSTRUCCIÓN HASTA QUE NO HAYA MÁS
INTERACCIÓN DEL PRODUCTO CON SU PACIENTE.**

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Nitrato de Potasio a 6%, Fluoruro de Sodio 0,2%, Humectante (Glicerol), Neutralizadores, Espesantes y Agua Desionizada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA ESENTE 2% es un gel desensibilizante a base de nitrato de potasio al 6% y fluoruro de sodio al 2% para uso tópico, aplicado a bandejas individuales por el paciente en casa bajo seguimiento profesional.

INDICACIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA ESENTE 2% indicado para el tratamiento de dientes con hipersensibilidad baja a moderada.

Fue desarrollado para atenuar la hipersensibilidad dental encadenada por agentes térmicos y químicos, especialmente durante el blanqueamiento dental.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:

- Mantener siempre alejado del calor y/o de la luz solar;
- No utilizar si es alérgico a los componentes del producto;
- No ingerir el producto;
- En caso de reacciones alérgicas, remitir al paciente a atención médica con este documento;
- Producto no inyectable;
- No reutilizar el embalaje;
- POTENZA ESENTE 2% contraindicado para personas con un informe de alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula.

EFFECTOS ADVERSOS:

- La ingestión de grandes cantidades del producto puede causar náuseas.

ADVERTENCIAS:

- Sólo para uso odontológico e indicado por la dentista;
- Nunca use el producto si ha caducado;
- El producto debe manipularse de acuerdo con las instrucciones de uso;
- Es responsabilidad del profesional comprobar el pedido antes del uso del producto si este producto es compatible y adaptado para el uso deseado;
- Manténgalo fuera del alcance de los niños;
- Antes de su uso, tenga en cuenta la apariencia del producto, si nota alguna anomalía, comuníquese con el fabricante de inmediato;
- El fabricante no es responsable de los daños causados por el uso inadecuado o un manejo inadecuado;
- No reutilizar el embalaje vacío para otros fines;
- Para deshacerse del producto, siga la legislación local.

INSTRUCCIONES DE USO:

Estas instrucciones deben transmitirse al paciente.

1º Paso: Antes de realizar el blanqueamiento dental, cepillarse y usar hilo dental, eliminando cualquier suciedad de la superficie;

2° Paso: Aplicar, con la ayuda del aplicador de punta, el gel desensibilizante POTENZA ESENTE 0,2% en la bandeja de blanqueo dental. Aplique una pequeña porción en el espacio correspondiente a los dientes que se blanquearán. Adapta la bandeja al arco dental y presiona ligeramente para envolver la superficie con el gel;

3° Paso: Deja actuar durante 15 minutos. Retire la bandeja y realizar enjuague bucal con agua para eliminar todo el gel desensibilizante de la superficie dental. Es importante guiar al paciente p para que no trague el producto.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en su embalaje original;
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa;
- Conservar el producto a temperaturas de 0°C a 30°C.

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

- El producto puede ser transportado a temperaturas entre -5 °C y 50 °C;
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa.

FECHA DE FABRICACIÓN:

VER EMBALAJE

VIGENCIA

2 AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN - (SEGÚN RDC No. 6 DE 2015).

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. SOLO PARA USO DE PROFESIONALES DENTALES.

MANTENGA EL EMBALAJE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.



SIGA LAS
INSTRUCCIONES DE
USO CORRECTAS



DESTINE SOLO PARA
USO CON RECETA



MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS
NIÑOS



ENVASES
RÉCICLABLES



VER MANUAL DE
INSTRUCCIONES

POTENZA ESENTE 0,2%

Instrucciones de uso al paciente

PHS DO BRASIL LTDA

Calle Ottokar Doerffel, 1112, Barrio:
Atiradores, Ciudad: Joinville, Estado: SC, País:

Brasil CEP: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05

INDUSTRIA BRASILEÑA

E-MAIL: contato@phsdobrasil.com.br

Autorización de Operación MS: X401M5619X7L(8.11992.7)

Registro en ANVISA nº 81199279018

Gerente Técnico: ÉLEN ALVES LOOS - CRQ/SC N. 13303733

Nombre comercial del producto: POTENZA ESENTE 0,2%

Nombre técnico del producto: SUSTANCIA PARA EL TRATAMIENTO DE HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA

POR FAVOR, LEA TODA LA INFORMACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTE MATERIAL PARA SU CONSULTA HASTA EL CONSUMO TOTAL DEL PRODUCTO.

GUARDE ESTA INSTRUCCIÓN HASTA QUE NO HAYA MÁS INTERACCIÓN DEL PRODUCTO CON SU PACIENTE.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Nitrato de potasio a 6%, fluoruro de sodio 0,2%, humectante (glicerol), neutralizantes, espesantes y agua desionizada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA ESENTE 2% es un gel desensibilizante a base de nitrato de potasio al 6% y fluoruro de sodio al 2% para uso tópico, aplicado a bandejas individuales por el paciente en casa bajo seguimiento profesional.

INDICACIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA ESENTE 2% indicado para el tratamiento de dientes con hipersensibilidad baja a moderada. Fue desarrollado para atenuar la hipersensibilidad dental encadenada por agentes térmicos y químicos, especialmente durante el blanqueamiento dental.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:

- Mantener siempre alejado del calor y/o de la luz solar;
- No utilizar si es alérgico a los componentes del producto;
- No ingerir el producto;
- En caso de reacciones alérgicas, remitir al paciente a atención médica con este documento;
- Producto no inyectable;
- No reutilizar el embalaje;
- **POTENZA ESENTE 2%** contraindicado para personas con un informe de alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula.

EFFECTOS ADVERSOS:

- La ingestión de grandes cantidades del producto puede causar náuseas.

ADVERTENCIAS:

- Sólo para uso odontológico e indicado por la dentista;
- Nunca use el producto si ha caducado;
- El producto debe manipularse de acuerdo con las instrucciones de uso;
- Es responsabilidad del profesional comprobar el pedido antes del uso del producto si este producto es compatible y adaptado para el uso deseado;
- Manténgalo fuera del alcance de los niños;
- Antes de su uso, tenga en cuenta la apariencia del producto, si nota alguna anomalía, comuníquese con el fabricante de inmediato;
- El fabricante no es responsable de los daños causados por el uso inadecuado o un manejo inadecuado;
- No reutilizar el embalaje vacío para otros fines;
- Para deshacerse del producto, siga la legislación local.

INSTRUCCIONES DE USO PARA EL PACIENTE:

1° Paso: Antes de realizar el blanqueamiento dental, cepillarse y usar hilo dental, eliminando cualquier suciedad de la superficie;

2° Paso: Aplicar, con la ayuda del aplicador de punta, el gel desensibilizante POTENZA ESENTE 0,2% en la bandeja de blanqueo dental. Aplique una pequeña porción en el espacio correspondiente a los dientes que se blanquearán. Adapta la bandeja al arco dental y presiona ligeramente para envolver la superficie con el gel;

3° Paso: Deje actuar durante 15 minutos o durante el tiempo recomendado por tu dentista. Retire la bandeja y realizar enjuague bucal con agua para eliminar cualquier gel desensibilizante de la superficie dental.

IMPORTANTE: Evite tragar el gel y comuníquese con su dentista si hay alguna pregunta.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en su embalaje original;
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa;
- Conservar el producto a temperaturas de 0°C a 30°C.

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

- El producto puede ser transportado a temperaturas entre -5 °C y 50 °C;
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa.

FECHA DE FABRICACIÓN:

VER EMBALAJE

VIGENCIA:

2 AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN - (SEGÚN RDC No. 6 DE 2015).

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. SOLO PARA USO DE PROFESIONALES DENTALES.

MANTENGA EL EMBALAJE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.



SIGA LAS
INSTRUCCIONES DE
USO CORRECTAS



DESTINE SOLO PARA
USO CON RECETA



MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS
NIÑOS



ENVASES
RÉCICLABLES



VER MANUAL DE
INSTRUCCIONES