

Potenza

ATTACCO

HF

INSTRUÇÕES DE USO AO PROFISSIONAL



PHS DO BRASIL LTDA

Rua Guilherme Boldt 210, Bairro: Zona Industrial Norte, Cidade: Joinville,

Estado: Santa Catarina, País: Brasil - CEP: 89239-260

CNPJ: 17.910.389/0001-05 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Autorização de Funcionamento MS: X401M5619X7L (8.11992.7)

Notificação na ANVISA nº 8.11992.70019

EC

REP

CINTERQUAL – Soluções de Comércio

Internacional Lda; Avenida Defensores de Chaves, Nº 4

Escritório Idea Spaces – 1000-117

Lisboa – Portugal +351 967 417 654

Nome Comercial do Produto: POTENZA ATTACCO HF.

Nome Comercial Alternativo: CONDICIONADOR ÁCIDO PARA CERÂMICAS.

Nome Técnico do Produto: CONDICIONADORES ÁCIDO.

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO ANTES DE APLICAR O PRODUTO.

GUARDE ESTA INSTRUÇÃO ATÉ NÃO HAVER MAIS INTERAÇÃO DO PRODUTO COM O SEU PACIENTE.



Suporte Técnico

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br

CE

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Ácido Fluorídrico a 5% ou 10% (conforme versão), Corante, Espessantes e Água Deionizada.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA ATTACCO HF é um condicionador ácido à base de ácido fluorídrico a 5% ou 10%, de acordo com a versão. Possui viscosidade média e efeito tixotrópico, restringindo-se ao local onde é aplicado sem excessivo escoamento. O gel possui corante para facilitar a visualização da área de aplicação e é altamente hidrossolúvel.

INDICAÇÃO DO PRODUTO:

Indicado para condicionamento ácido de porcelanas dentais com o objetivo de aumentar a microancoragem mecânica e área de superfície para adesivos e cimentos, favorecendo a resistência adesiva da peça após a cimentação desta no dente.

PRECAUÇÕES:

- Manter afastado de luz solar;
- O contacto do produto com os olhos e/ou pele pode causar queimaduras;
- A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas;
- Este produto deve ser utilizado apenas extraoralmente, em peças protéticas ainda não cimentadas no dente;
- Produto não injetável;
- Não reutilize a embalagem.

CONTRAINDICAÇÕES:

- Contraindicado para pessoas com alergia a algum dos componentes da fórmula;

EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS:

- O contacto com tecidos moles pode causar irritação e a ingestão acidental do produto pode causar intoxicação por fluoretos;
- Em caso de reação alérgica, contactar o médico ou farmacêutico ou fabricante, na posse desta instrução de utilização.

ADVERTÊNCIAS:

- Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado;
- Exclusivo para uso odontológico e deve ser manipulado de acordo com as instruções de utilização;
- É de responsabilidade do profissional comprovar, antes da utilização do produto se o mesmo é compatível e adequado para a utilização desejada;
- Manter fora do alcance de crianças;

- Antes de utilizar observe o aspecto do produto. Caso perceba alguma anomalia, entre em contacto imediatamente com o fabricante;
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso inadequado ou por manipulação incorreta;
- Em caso de incidentes graves relacionado com o uso do produto, este deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente;
- Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins;
- A qualidade e a estabilidade física do condicionador à base de ácido fluorídrico podem deteriorar-se com o reuso, levando a mudanças na viscosidade e na textura do produto;
- Para realizar a eliminação segura do DM após utilização, siga a legislação local.

INSTRUÇÕES DE USO:

O produto deve ser aplicado apenas na área interna da peça protética, a qual receberá o agente cimentante. O tempo de contacto do produto com a peça varia conforme o tipo de substrato. Sugere-se seguir as orientações do fabricante da cerâmica para correto direcionamento. O quadro de tempos de aplicação mostrado neste documento consiste em uma sugestão:

SUPERFÍCIE	TEMPO PARA CONDICIONAMENTO DO POTENZA ATTACCO HF 5%	TEMPO PARA CONDICIONAMENTO DO POTENZA ATTACCO HF 10%
Porcelana feldspática	-	60s – 120s
Cerâmica vítrea reforçada com leucita	-	60s
Cerâmica vítrea à base de dissilicato de lítio	20s	-
Zircônia	NÃO CONDICIONÁVEL	NÃO CONDICIONÁVEL

1º Passo: Aplique POTENZA ATACCO HF apenas na face interna da peça cerâmica (incluindo bordas) a qual receberá o agente cimentante. Deixe o produto agir de acordo com o tempo recomendado;

2º Passo: Remova o ácido com lavagem abundante durante 2 minutos. Esta lavagem pode ser feita em cuba ultrassônica ou por meio de spray de ar/água. Então, seque a peça e observe aspecto esbranquiçado e opaco;

3° Passo: Aplique condicionador ácido fosfórico a 35% (ex: POTENZA ATTACCO 35%) por toda a superfície que fora condicionada com o condicionador de ácido fluorídrico previamente. Deixe agir por 1 minuto e então lave copiosamente e seque a superfície;

4° Passo: Com a superfície seca e limpa, aplique o agente silano, primer ou adesivo universal, conforme escolha. Respeite os passos adesivos para a peça e dente de acordo com as instruções do fabricante dos respectivos materiais.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

- Manter o produto na embalagem original;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar o produto a temperaturas entre 0 °C a 30 °C.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

- O produto pode ser transportado a temperaturas entre -5 °C a 50 °C;
- Proteger da incidência da luz solar direta.

DATA DE FABRICO: VIDE EMBALAGEM

PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICO.

PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. SOMENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM O PRODUTO A SER UTILIZADO.

PARA TER ACESSO À VERSÃO IMPRESSA DA INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, ENTRE EM CONTACTO COM O SUPORTE TÉCNICO DA EMPRESA.

MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

Data Publicada: 21/05/2025

Código: IFU-014

Versão: 06

Potenza ATTACCO

HF

INSTRUCTIONS FOR USE FOR PROFESSIONALS



PHS DO BRASIL LTDA

Guilherme Boldt Street, 210, District: Zona Industrial Norte, City: Joinville,

State: Santa Catarina, Country: Brazil - Zip Code: 89239-260

CNPJ: 17.910.389/0001-05 - BRAZILIAN INDUSTRY

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Health Ministry's Operating Licence: X401M5619X7L (8.11992.7)

Notification at ANVISA number: 8.11992.70019



CINTERQUAL – Commerce Solutions

International Lda; Avenida Defensores de Chaves, Nº 4

Idea Spaces Office – 1000-117

Lisboa – Portugal +351 967 417 654

Product Commercial Name: POTENZA ATTACCO HF.

Alternative Commercial Name: ACID ETCHANT FOR CERAMICS.

Technical Product Name: ACID CONDITIONERS.

READ ALL THE INFORMATION IN THIS INSTRUCTION FOR USE CAREFULLY BEFORE APPLYING THE PRODUCT.

KEEP THIS INSTRUCTION UNTIL THERE IS NO FURTHER INTERACTION OF THE PRODUCT WITH YOUR PATIENT.



Technical Support

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br



BASIC COMPOSITION:

Fluoridic Acid at 5 and 10%, Dye, Thickeners and Deionized Water.

PRODUCT DESCRIPTION:

POTENZA ATTACCO FLUORIDIC ACID CONDITIONER is found in concentrations of 5 and 10%. It is a thixotropic gel used for surface conditioning of dental porcelains. The conditioning allows the adhesion of feldspar porcelain, ceramic glazing and fixation of orthodontic brackets and repairs of porcelain with composites.

PRODUCT INDICATION:

Indicated for conditioning of dental porcelain, treatment carried out before silanization and application of adhesives. It aims to increase adhesion in restoration processes. Conditioning is essential for an optimal interaction between resin cement and ceramic restoration to occur, thus favoring greater retention and resistance.

PRECAUTIONS:

- Keep away from sunlight;
- The contact of the product with eyes and/or skin can cause burning;
- Ingestion of big quantities of the product can cause nausea;
- This product should only be used extraorally, on prosthetic pieces that are not yet cemented to the tooth;
- Non-injectable product;
- Do not reuse the packaging.

CONTRAINDICATIONS:

- POTENZA ATTACCO FLUORIDIC ACID CONDITIONER is contraindicated for individuals with allergic to any of the components of the formula.

POSSIBLE SIDE EFFECTS:

- Contact with soft tissues may cause irritation, and accidental ingestion of the product may lead to fluoride poisoning;
- In case of an allergic reaction, contact a doctor, pharmacist, or manufacturer, providing this instruction for use.

WARNING:

- Never use the product if it is past its expiration date;
- For dental use only, and must be handled according to the instructions for use;
- It is the responsibility of the professional to verify, before use, if the product is compatible and suitable for the desired application;
- Keep out of reach of children;

- Before use, check the appearance of the product. If you notice any abnormalities, contact the manufacturer immediately;
- The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use or incorrect handling;
- In case of serious incidents related to the use of the product, report it to the manufacturer and the competent authority;
- Do not reuse the empty packaging for other purposes;
- The quality and physical stability of the hydrofluoric acid-based conditioner may deteriorate with reuse, leading to changes in viscosity and texture of the product;
- For the safe disposal of DM after use, follow local legislation.

INSTRUCTIONS FOR USE:

The treatment of the internal surface of the prosthetic parts must follow the indication according to the instructions of the porcelain manufacturer.

SURFACE	CONDITIONING TIME FOR POTENZA ATTACCO HF 5%	CONDITIONING TIME FOR POTENZA ATTACCO HF 10%
Feldspathic Porcelain	-	60s – 120s
Glass Ceramics Reinforced with Leucite	-	60s
Lithium Disilicate Based Glass Ceramics	20s	-
Zirconia	UNCONDITIONABLE	UNCONDITIONABLE

After conditioning with Hydrofluoric Acid, proceed as follows:

1st STEP: Wash with plenty of water until the product is completely removed and dry well.

2nd STEP: Proceed with silanization according to the manufacturer's instructions.

3rd STEP: Apply the adhesive system.

Observation: Conduct the dental substrate with POTENZA ATTACCO 35% PHOSPHORICACID CONDITIONER. The conditioning of the dental substrate can vary according to the type of adhesive system, selective enamel conditioning can be performed, in the case of self-etching adhesive system. The choice of composite (in the case of repair) or resin cement is also the professional's choice.

CONSERVATION AND STORAGE:

- Keep the product in its original package;
- Protect it from direct sunlight;
- Keep it in temperatures between 0 °C to 30 °C (32 °F to 86 °F).

TRANSPORT CONDITIONS:

- Product must be transported in temperatures between -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F).
- Protect it from direct sunlight.

MANUFACTURING DATE: SEE PACKAGING.

EXPIRATION DATE: 2 YEARS AFTER THE MANUFACTURE DATE.

EXCLUSIVELY FOR USE IN DENTAL OFFICES. FOR USE ONLY BY DENTAL PROFESSIONALS.

MAKE SURE THE INSTRUCTION FOR USE MATCHES THE PRODUCT TO BE USED.

TO ACCESS A PRINTED VERSION OF THE INSTRUCTION FOR USE, CONTACT THE COMPANY'S TECHNICAL SUPPORT.

KEEP THE PACKAGE CLOSED WHEN NOT IN USE.

Publication Date: 05-21-2025

Code: IFU-014

Version: 06



Potenza ATTACCO

HF

INSTRUCCIONES DE USO AL PROFESIONAL



PHS DO BRASIL LTDA

Calle Guilherme Boldt 210, Barrio: Zona Industrial Norte, Ciudad: Joinville,

Estado: Santa Catarina, País: Brasil - CEP: 89239-260

CNPJ: 17.910.389/0001-05 - INDUSTRIA BRASILEÑA

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Autorización de Operación MS:X401M5619X7L (8.11992.7)

Notificación en ANVISA nº 8.11992.70019



CINTERQUAL – Soluciones de Comercio

Internacional Lda; Avenida Defensores de Chaves, Nº 4

Escritório Idea Spaces – 1000-117

Lisboa – Portugal +351 967 417 654

Nombre Comercial del Producto: POTENZA ATTACCO HF.

Nombre Comercial Alternativo: ACONDICIONADOR ÁCIDO PARA CERÁMICA.

Nombre Técnico del Producto: ACONDICIONADORES ÁCIDO.

LEA CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTE INSTRUCTIVO HASTA QUE NO HAYA MÁS INTERACCIÓN DEL PRODUCTO CON SU PACIENTE.



Soporte Técnico

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br



COMPOSICIÓN BÁSICA:

Ácido Fluorhídrico a 5% o 10% (según versión), colorante, espesantes y agua desionizada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA ATTACCO HF es un acondicionador ácido a base de ácido fluorhídrico 5% o 10%, según la versión. Tiene viscosidad media y efecto tixotrópico, restringiéndose al lugar donde se aplica sin flujo excesivo. El gel tiene colorante para facilitar la visualización del área de aplicación y es altamente soluble en agua.

INDICACIÓN DEL PRODUCTO:

Indicado para acondicionamiento ácido de porcelanas dentales con el fin de aumentar el microanchorage mecánico y la superficie para adhesivos y cementos, favoreciendo la resistencia adhesiva de la pieza después de cementarla en el diente.

PRECAUCIONES:

- Mantener alejado de la luz solar;
- El contacto del producto con los ojos y/o la piel puede causar quemaduras;
- La ingestión de grandes cantidades del producto puede causar náuseas;
- Este producto debe usarse solo extra oralmente en partes protésicas aún no cementadas en el diente;
- Producto no inyectable;
- No reutilizar el embalaje.

CONTRAINDICACIONES:

- Contraindicado para personas con alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS:

- O contacto com tecidos moles pode causar irritação e a ingestão acidental do produto pode causar intoxicação por fluoretos;
- En caso de reacción alérgica, contactar con un médico, farmacéutico o el fabricante, proporcionando esta instrucción de uso.

ADVERTENCIAS:

- Nunca utilice el producto si ha expirado la fecha de caducidad;
- Exclusivo para uso odontológico y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso;
- Es responsabilidad del profesional verificar, antes de utilizar el producto, si es compatible y adecuado para el uso deseado;
- Mantener fuera del alcance de los niños;

- Antes de utilizarlo, observe el aspecto del producto. Si nota alguna anomalía, contacte inmediatamente con el fabricante;
- El fabricante no se responsabiliza por daños causados por uso inadecuado o por manipulación incorrecta;
- En caso de incidentes graves relacionados con el uso del producto, debe comunicarse con el fabricante y con la autoridad competente;
- No reutilice el envase vacío para otros fines;
- La calidad y estabilidad física del acondicionador a base de ácido fluorhídrico pueden deteriorarse con el reuso, causando cambios en la viscosidad y la textura del producto;
- Para realizar la eliminación segura del DM después de su uso, siga la legislación local.

INSTRUCCIONES DE USO:

El producto debe aplicarse solo en el área interna de la parte protésica, que recibirá el agente cementante. El tiempo de contacto del producto con la pieza varía en función del tipo de sustrato. Se sugiere seguir las orientaciones del fabricante de cerámica para una dirección correcta. El marco de tiempo de aplicación que se muestra en este documento consiste en una sugerencia:

SURPERFICIE	TIEMPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE POTENZA ATTACCO HF 5%	TIEMPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE POTENZA ATTACCO HF 10%
Porcella Feldespática	-	60s – 120s
Cerámica vítrea reforzada con leucita	-	60s
Cerámica vítrea a base de disilicato de litio	20s	-
Zirconia	NO COMPATIBLE	NO COMPATIBLE

1° Paso: Aplique POTENZA ATACCO HF solo en el lado interior de la pieza de cerámica (incluidos los bordes) que recibirá el agente cementante. Deje que el producto actúe de acuerdo con el tiempo recomendado;

2° Paso: Retire el ácido con un lavado abundante durante 2 minutos. Este lavado se puede hacer en una bañera ultrasónica o por pulverización de aire / agua. Luego, seca la pieza y observa un aspecto blanquecino y opaco;

3° Paso: Aplique acondicionador de ácido fosfórico a 35% (por ejemplo, POTENZA ATTACCO 35%) por toda la superficie que había sido acondicionada con el acondicionador de ácido fluorhídrico previamente. Dejar actuar durante 1 minuto y luego lavar copiosamente y secar la superficie;

4° Paso: Con la superficie seca y limpia, aplique el agente silano, primer o adhesivo universal, a su elección. Respetar los pasos adhesivos para la pieza y el diente de acuerdo con las instrucciones del fabricante para los materiales respectivos.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en su embalaje original;
- Proteger de la influencia de la luz solar directa;
- Guarde el producto a temperaturas de 0 °C y 30 °C.

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

- El producto puede transportarse a temperaturas entre -5 °C y 50 °C.
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa.

FECHA DE FABRICACIÓN: VER EMBALAJE

FECHA DE CADUCIDAD: 2 AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS. SOLO PARA USO DE PROFESIONALES DEL ÁREA ODONTOLÓGICA.

ASEGÚRESE DE QUE LAS INSTRUCCIONES DE USO CORRESPONDAN AL PRODUCTO QUE SE VA A UTILIZAR.

PARA ACCEDER A LA VERSIÓN IMPRESA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SOPORTE TÉCNICO DE LA EMPRESA.

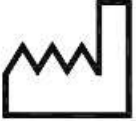
MANTENGA EL EMBALAJE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.

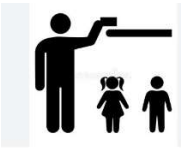
Fecha de Publicación: 21/05/2025

Código: IFU-014

Versión: 06

PICTOGRAMAS / PICTOGRAMS / PICTOGRAMAS

	Data de Fabricação Manufacture Date Fecha de Fabricación		Número de Referência Reference Number Numero de Referencia
	Data de Validade Expiration Date Fecha de Caducidad		Dispositivo Médico Medical Device Dispositivo Médico
	Fabricante Manufacturer Identification Fabricante		Identificação Única do Dispositivo Unique Device Identifier Identificación Única del Dispositivo
	Marcação CE CE Marking Marcado CE		Código de Lote Lot Code Código de Lote

	Mandatário na Comunidade Europeia/União Europeia Authorised Representative in the European Community/European Union Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia		Manter Longe da Luz Solar Keep Away From Sunlight Mantener Alejado de la Luz Solar
	Consultar as Instruções de Utilização Eletrônicas Consult the Electronic Instructions for Use Consultar las Instrucciones de Uso Electrónicas		Manter Seco Keep Dry Mantener Seco
	Não Estéril Non-Sterile No Estéril		Manter Fora do Alcance das Crianças Keep Out of Reach of Children Mantener Fuera del Alcance de los Niños

	Limites de Temperatura Temperature Limits Límites de Temperatura		Plástico Polipropileno Polypropylene Plastic Plástico Polipropileno
	Não Reutilizar Do Not Reuse No reutilizar		Somente para Uso Profissional For Professional Use Only Solo para Uso Profesional



Código	Descrição
683	1 Seringa Potenza Attacco HF 5% (contendo 3g) + 1 Ponteira Aplicadora
1287	1 Seringa Potenza Attacco HF 10% (contendo 3g) + 1 Ponteira Aplicadora

Code	Description
683	1 Potenza Attacco HF 5% Syringe (containing 3g) + 1 Applicator Tip
1287	1 Potenza Attacco HF 10% Syringe (containing 3g) + 1 Applicator Tip

Código	Descripción
683	1 Jeringa Potenza Attacco HF 5% (que contiene 3g) + 1 Punta Aplicadora
1287	1 Jeringa Potenza Attacco HF 10% (que contiene 3g) + 1 Punta Aplicadora