

Potenza ATTACCO

INSTRUÇÃO DE USO AO PROFISSIONAL

PHS DO BRASIL LTDA

Rua Ottokar Doerffel, 1112, Bairro: Atiradores, Cidade: Joinville,

Estado: SC, País: Brasil CEP: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05. INDÚSTRIA BRASILEIRA

E-mail: contato@phsdo brasil.com.br

Autorização de Funcionamento MS: X401M5619X7L (8.11.992-7)

Notificação na ANVISA nº8.11992.70019

Nome Comercial Do Produto: POTENZA ATTACCO HF.

Nome Técnico do Produto: CONDICIONADORES ÁCIDOS.

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA INSTRUÇÃO DE USO ANTES DE APLICAR O PRODUTO.

GUARDE PARA CONSULTA ATÉ O CONSUMO TOTAL DO PRODUTO. GUARDE ESTA INSTRUÇÃO ATÉ NÃO HAVER MAIS INTERAÇÃO DO PRODUTO COM O SEU PACIENTE.



Suporte Técnico

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Ácido Fluorídrico a 5% ou 10% (conforme versão), Corante, Espessantes e Água Deionizada.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA ATTACCO HF é um condicionador ácido à base de ácido fluorídrico a 5% ou 10%, de acordo com a versão. Possui viscosidade média e efeito tixotrópico, restringindo-se ao local onde é aplicado sem excessivo escoamento. O gel possui corante para facilitar a visualização da área de aplicação e é altamente hidrossolúvel.

INDICAÇÃO DO PRODUTO:

Indicado para condicionamento ácido de porcelanas dentais com o objetivo de aumentar a microancoragem mecânica e área de superfície para adesivos e cimentos, favorecendo a resistência adesiva da peça após a cimentação desta no dente.

PRECAUÇÕES:

- Manter afastado de luz solar;
- O contato do produto com os olhos e/ou pele pode causar queimaduras;
- A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas;
- Este produto deve ser utilizado apenas extraoralmente, em peças protéticas ainda não cimentadas no dente;
- Caso haja contato do produto com o paciente e este apresente reação alérgica, encaminhá-lo para o pronto atendimento em posse destas instruções de uso do produto;
- Produto não injetável;
- Não reutilize a embalagem.

CONTRAINDICAÇÕES:

- Contraindicado para pessoas com relato de alergia a algum dos componentes da fórmula;

EFEITOS COLATERAIS:

- O contato com tecidos moles pode causar irritação e a ingestão acidental do produto pode causar intoxicação por fluoretos;
- Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas e encaminhar o paciente ao pronto atendimento em posse destas instruções de uso do produto.

ADVERTÊNCIA:

- Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado;
- Exclusivo para uso odontológico e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso;
- É de responsabilidade do profissional comprovar, antes da utilização do produto se o mesmo é compatível e adequado para a utilização desejada;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Antes de utilizar observe o aspecto do produto. Caso perceba alguma anomalia, entre em contato imediatamente com o fabricante;
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso inadequado ou por manipulação incorreta;
- Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins;
- Para realizar o descarte do produto, siga a legislação local.

INSTRUÇÕES DE USO:

O produto deve ser aplicado apenas na área interna da peça protética, a qual receberá o agente cimentante. O tempo de contato do produto com a peça varia conforme o tipo de substrato. Sugere-se seguir as orientações do fabricante da cerâmica para correto direcionamento. O quadro de tempos de aplicação mostrado neste documento consiste em uma sugestão:

1º Passo: Aplique POTENZA ATACCO HF apenas na face interna da peça cerâmica (incluindo bordas) a qual receberá o agente cimentante. Deixe o produto agir de acordo com o tempo recomendado;

SUPERFÍCIE	Tempo para Condicionamento do Potenza Attacco HF 5%	Tempo para Condicionamento do Potenza Attacco HF 10%
Porcelana feldspática	-	60s – 120s
Cerâmica vítrea reforçada com leucita	-	60s
Cerâmica vítrea à base de dissilicato de lítio.	20s	-
Zircônia	NÃO CONDICIONÁVEL	NÃO CONDICIONÁVEL

2º Passo: Remova o ácido com lavagem abundante durante 2 minutos. Esta lavagem pode ser feita em cuba ultrassônica ou por meio de spray de ar/água. Então, seque a peça e observe aspecto esbranquiçado e opaco;

3º Passo: Aplique condicionador ácido fosfórico a 35% (ex: POTENZA ATTACCO 35%) por toda a superfície que fora condicionada com o condicionador de ácido fluorídrico previamente. Deixe agir por 1 minuto eentão lave copiosamente e seque a superfície;

4º Passo: Com a superfície seca e limpa, aplique o agente silano, primer ouadesivo universal, conforme escolha. Respeite os passos adesivos para a peça e dente de acordo com as instruções do fabricante dos respectivos materiais.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

- Manter o produto na embalagem original;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar o produto em temperaturas de 0 °C a 30 °C.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

- O produto pode ser transportado a temperaturas entre -5°C e 50°C;
- Proteger da incidência da luz solar direta.

DATA DE FABRICAÇÃO: VIDE EMBALAGEM


PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.

PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. SOMENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A INSTRUÇÃO DE USO ESTÁ DE ACORDO COMO PRODUTO A SER UTILIZADO.

PARA TER ACESSO À VERSÃO IMPRESSA DA INSTRUÇÃO DE USO, ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO DA EMPRESA.

MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

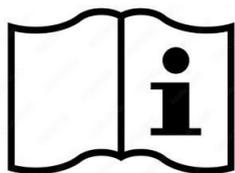

CONSULTAR AS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO



MANTER FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS

R_x

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL



IRRITANTE



CORROSIVO

MI0048 – REV. 04



Suporte Técnico

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br

Potenza

ATTACCO

INSTRUCTIONS FOR USE FOR PROFESSIONALS

PHS DO BRASIL LTDA

Street Ottokar Doerffel, 1112, District: Atiradores, City: Joinville,

State: SC, Country: Brazil CEP Zip Code: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05 - BRAZILIAN INDUSTRY

EMAIL: contato@phsdobrasil.com.br

Health Ministry's Operating Licence: X401M5619X7L(8.11992.7)

Notification at ANVISA number 8.11992.70019

Product's Name: POTENZA ATTACCO HF.

Product's technical name: ACID CONDITIONERS.

READ ALL INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.

**KEEP THIS DOCUMENT UNTIL THERE IS NO MORE INTERACTION OF
THE PRODUCT WITH YOUR PATIENT.**



Technical Support

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br

BASIC COMPOSITION:

Fluoridic Acid at 5 and 10%, Dye, Thickeners and Deionized Water.

PRODUCT'S DESCRIPTION:

POTENZA ATTACCO FLUORIDIC ACID CONDITIONER is found in concentrations of 5 and 10%. It is a thixotropic gel used for surface conditioning of dental porcelains. The conditioning allows the adhesion of Feldspar porcelain, ceramic glazing and fixation of orthodontic brackets and repairs of porcelain with composites.

PRODUCT'S INDICATION:

Indicated for conditioning of dental porcelain, treatment carried out before silanization and application of adhesives. It aims to increase adhesion in restoration processes. Conditioning is essential for an optimal interaction between resin cement and ceramic restoration to occur, thus favoring greater retention and resistance.

PRECAUTIONS:

- Keep away from sunlight;
- The contact of the product with eyes and/or skin can cause burning;
- Ingestion of big quantities of the product can cause nausea;
- The professional should instruct the patient not to swallow the product;
- If the patient swallows a big quantity of it and presents any side effect, the professional should take him/her to get medical assistance, along with this instruction's manual;
- This product is not for injection;
- Do not reuse the package.

CONTRAINDICATIONS:

POTENZA ATTACCO FLUORIDIC ACID CONDITIONER is contraindicated for individuals with history of allergic reactions to any of the components of the formula.

SIDE EFFECTS:

Contact with soft tissues can cause irritation and accidental ingestion of the product can cause fluoride poisoning.

WARNINGS:

- Do not use the product after its expiry date;
- This product is exclusive for dental use according to this document;
- It is of full responsibility of the professional to make sure, before using the product, if it is compatible to the desired use;
- Keep out of children’s reach;
- Before using the product, observe the aspect of it. If any variation is noticed, contact the manufacturer immediately;
- The manufacturer does not take responsibility for eventual damages caused by inadequate use or incorrect manipulation;
- Do not reuse the empty package;
- For proper product disposal, follow local legislation.

INSTRUCTIONS FOR USE:

The product must only be applied to the internal area of the prosthetic part, which will receive the cementing agent. The contact time of the product with the part varies depending on the type of substrate. Suggest following the ceramic manufacturer's guidelines for correct direction. The application time table shown in this document consists of a suggestion:

1st STEP: Apply POTENZA ATACCO HF only to the internal face of the ceramic piece (including edges) which will receive the cementing agent. Let the product act according to the recommended time;

SURFACE	Conditioning time for Potenza Attacco Hydrofluoric Acid 5%	Conditioning time for Potenza Attacco Hydrofluoric Acid 10%
	FELDSPATHIC PORCELAIN	-
GLASS CERAMICS REINFORCED WITH LEUCITE	-	60s
LITHIUM DISSILICATE- BASED GLASS CERAMICS	20s	-
ZIRCONIA	UNCONDITIONABLE	UNCONDITIONABLE

2nd STEP: Remove the acid by washing thoroughly for 2 minutes. This washing can be done in an ultrasonic tank or using an air/water spray. Then, dry the piece and observe a whitish and opaque appearance;

3rd STEP: Apply 35% phosphoric acid conditioner (ex: POTENZA ATTACCO 35%) to the entire surface that was previously conditioned with the hydrofluoric acid conditioner. Leave it to act for 1 minute and then wash copiously and dry the surface;

4th STEP: With the surface dry and clean, apply the silane agent, primer or universal adhesive, depending on your choice. Follow the adhesive steps for the part and teeth in accordance with the manufacturer's instructions for the respective materials.

CONSERVATION AND STORAGE:

- Keep the product in its original package;
- Protect it from direct sunlight;
- Keep it in temperatures between 0°C to 30°C (32o F to 86o F).

TRANSPORTATION CONDITIONS:


- Product must be transported in temperatures between -5°C e 50°C (23o F to 122o F).
- Protect it from direct sunlight.

DATE OF MANUFACTURE: SEE PACKAGE.

EXPIRY DATE: 2 YEARS AFTER DATE OF MANUFACTURE.

PRODUCT FOR EXCLUSIVE USE IN DENTAL OFFICE AND ONLY BY DENTAL PROFESSIONALS.

WHEN NOT IN USE, KEEP THE PRODUCT'S PACKAGE CLOSED.

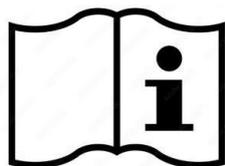

CONSULT THE INSTRUCTIONS
FOR USE



KEEP THE PRODUCT OUT OF THE
REACH OF CHILDREN

R_x

FOR PROFESSIONAL USE ONLY



IRRITATING



CORROSIVE

MI0048 - REV. 04



Technical Support

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br

Potenza ATTACCO

INSTRUCCIONES DE USO AL PROFESIONAL

PHS DO BRASIL LTDA

Calle Ottokar Doerffel, 1112, Barrio: Atiradores,
Ciudad: Joinville, Estado: SC, País:
Brasil - CEP: 89203-212 CNPJ: 17.910.389/0001-05
INDUSTRIA BRASILEÑA

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Autorización de Operación MS: X401M5619X7L (8.11992.7)

Notificación en ANVISA nº 8.11992.70019

Nombre comercial del producto: POTENZA ATTACCO HF.

Nombre técnico del producto: ACONDICIONADORES ÁCIDO.

POR FAVOR, LEA TODA LA INFORMACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

GUARDE ESTA INSTRUCCIÓN HASTA QUE NO HAYA MÁS INTERACCIÓN DEL PRODUCTO CON SU PACIENTE.



Soporte Técnico

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br

COMPOSICIÓN BÁSICA:

Ácido Fluorhídrico a 5% o 10% (según versión), colorante, espesantes y agua desionizada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA ATTACCO HF es un acondicionador ácido a base de ácido fluorhídrico a 5% o 10%, según la versión. Tiene viscosidad media y efecto tixotrópico, restringiéndose al lugar donde se aplica sin flujo excesivo. El gel tiene colorante para facilitar la visualización del área de aplicación y es altamente soluble en agua.

INDICACIÓN DEL PRODUCTO:

Indicado para acondicionamiento ácido de porcelanas dentales con el fin de aumentar el microanchorage mecánico y la superficie para adhesivos y cementos, favoreciendo la resistencia adhesiva de la pieza después de cementarla en el diente.

PRECAUCIONES:

- Mantener alejado de la luz solar;
- El contacto del producto con los ojos y/o la piel puede causar quemaduras;
- La ingestión de grandes cantidades del producto puede causar náuseas;
- Este producto debe usarse solo extra oralmente en partes protésicas aún no cementadas en el diente;
- Si hay contacto del producto con el paciente y el paciente presenta reacción alérgica, llevarlo a la Sala de Emergencias en posesión de estas Instrucciones de Uso del producto;
- Producto no inyectable;
- No reutilizar el embalaje.

CONTRAINDICACIONES:

Contraindicado para personas con un informe de alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula.

EFECTOS COLATERALES:

- El contacto con los tejidos blandos puede causar irritación y la ingestión accidental del producto puede causar intoxicación por fluoruro;
- Suspender el uso del producto en caso de reacciones alérgicas y derivar al paciente al Servicio de Urgencias en posesión de estas Instrucciones de Uso del producto.

ADVERTENCIA:

- Nunca use el producto si ha caducado;
- Exclusivo para uso odontológico y debe manipularse de acuerdo con las instrucciones de uso;
- Es responsabilidad del profesional comprobar el pedido antes del uso del producto si este producto es compatible y adaptado para el uso deseado;
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE USO:

El producto debe aplicarse solo en el área interna de la parte protésica, que recibirá el agente cementante. El tiempo de contacto del producto con la pieza varía en función del tipo de sustrato. Se sugiere seguir las orientaciones del fabricante de cerámica para una dirección correcta. El marco de tiempo de aplicación que se muestra en este documento consiste en una sugerencia:

1º Paso: Aplique POTENZA ATACCO HF solo en el lado interior de la pieza de cerámica (incluidos los bordes) que recibirá el agente cementante. Deje que el producto actúe de acuerdo con el tiempo recomendado:

Superficie	Tiempo para el Acondicionamiento de Potenza Attacco HF 5%	Tiempo para el Acondicionamiento de Potenza Attacco HF 10%
Porcella feldespática	-	60s - 120s
Cerámica vítrea reforzada con leucita	-	60s
Cerámica vítrea a base de disilicato de litio	20s	-
Zirconia	NO COMPATIBLE	NO COMPATIBLE

2º Paso: Retire el ácido con un lavado abundante durante 2 minutos. Este lavado se puede hacer en una bañera ultrasónica o por pulverización de aire / agua. Luego, seca la pieza y observa un aspecto blanquecino y opaco;

3º Paso: Aplique acondicionador de ácido fosfórico a 35% (por ejemplo POTENZA ATTACCO 35%) por toda la superficie que había sido acondicionada con el acondicionador de ácido fluorhídrico previamente. Dejar actuar durante 1 minuto y luego lavar copiosamente y secar la superficie;

4º Paso: Con la superficie seca y limpia, aplique el agente silano, primer o adhesivo universal, a su elección. Respetar los pasos adhesivos para la pieza y el diente de acuerdo con las instrucciones del fabricante para los materiales respectivos.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en su embalaje original;
- Proteger de la influencia de la luz solar directa;
- Guarde el producto a temperaturas de 0°C a 30°C.

CONDICIONES DE TRANSPORTE:


- El producto puede transportarse a temperaturas entre -5°C y 50°C ;
- Proteger de la incidencia de la luz solar directa.

FECHA DE FABRICACIÓN: VER EMBALAJE.


VIGENCIA: 2 AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

VENTA DE PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. SOLO PARA USO DE PROFESIONALES DENTALES.

MANTENGA EL EMBALAJE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.

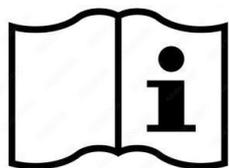

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES
DE USO

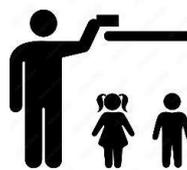

MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

R_x

SÓLO PARA USO PROFESIONAL



IRRITANTE



CORROSIVO

MI0048 – REV. 04



Soporte Técnico

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br